

**Jeden system dla
wszystkich wskazań do
zastosowania implantów**


OneQ-SL

Spis treści

Spis treści	2
OneQ-SL – system implantologiczny dla wszystkich wskazań	4
OneQ-SL wąski (rozmiar $\varnothing 3,0$, $\varnothing 3,3$)	6
OneQ-SL standardowy (rozmiar $\varnothing 3,7$, $\varnothing 4,2$, $\varnothing 4,7$, $\varnothing 5,2$)	8
OneQ-SL szeroki (rozmiar $\varnothing 6,0$, $\varnothing 7,0$, $\varnothing 8,0$)	10
OneQ-SL – rodzaje implantów	12
Śruby mocujące i łączniki gojące	15
Schematy protetyczne dla OneQ Sole System	18
Schematy protetyczne dla OneQ Couple System	24
Schematy protetyczne dla OneQ Sub Octa System	40
Schematy protetyczne dla MU Abutment System	42
Schematy protetyczne dla OneQ Overdenture System	44
Prosty system implantologiczny	48
Instrukcja wiercenia OneQ	50
Koncepcja wiercenia i wstawiania implantów	51
Instrukcja do zestawu chirurgicznego	54
Zestaw chirurgiczny OneQ-SL Premium	55
Zaawansowany zestaw chirurgiczny OneQ-SL	56



OneQ-SL – system implantologiczny dla wszystkich wskazań

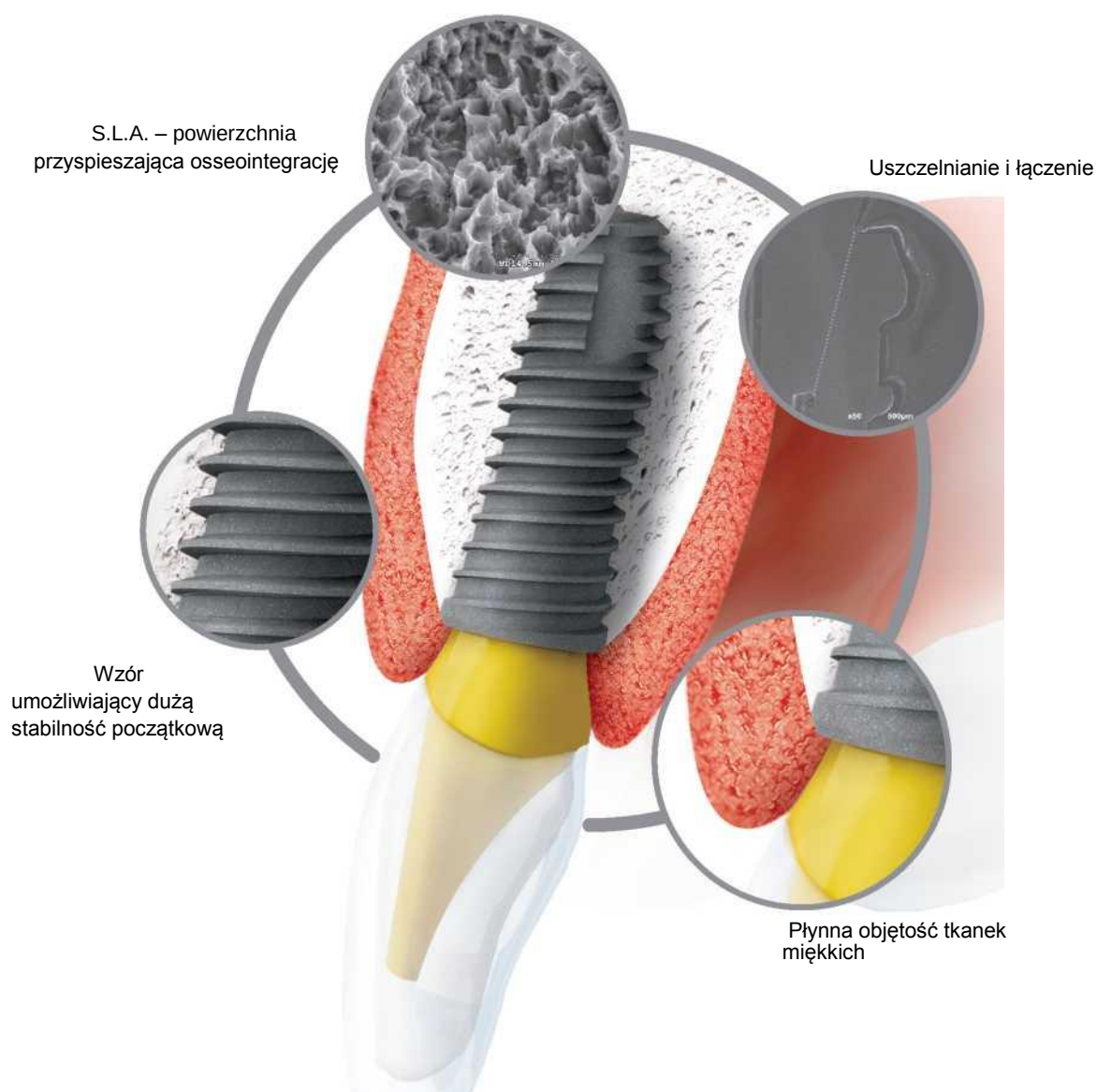

Wzór umożliwiający dużą stabilność początkową




- Podwójnie zwężany implant (standardowy i szeroki).

Prosty trzon i zwężana główka ułatwiają kontrolowanie głębokości oraz stabilne i prawidłowe mocowanie początkowe.

- Klin poprawia samogwintowanie i umożliwia osseointegrację, co może przyspieszyć stabilizację.

S.L.A. – powierzchnia przyspieszająca osseointegrację

- Powierzchnia mocniejsza o 200% w porównaniu z RBM.
- Skuteczna i doskonała osseointegracja.
- Najmniejsza ilość osadów.

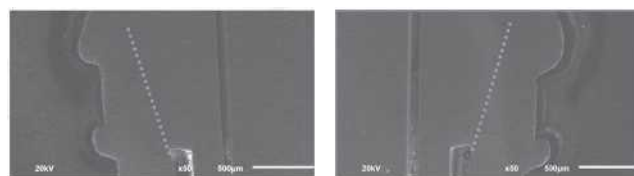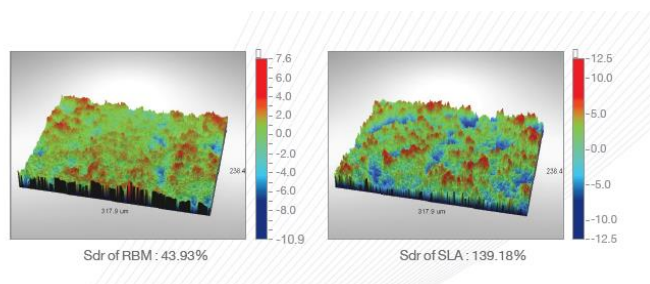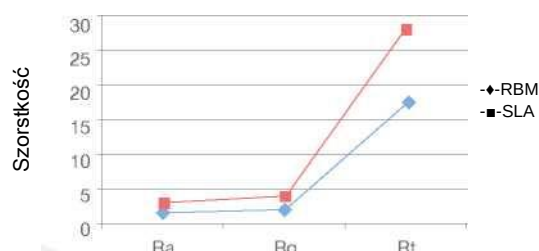

Uszczelnianie i łączenie

- 11-stopniowe zwężane połączenie wewnętrzne z sześciokątnym gniazdem zapobiega powstawaniu mikroszczelin i mikroruchów.

Płynna objętość tkanek miękkich

- Wbudowana zmiana platformy poprawia powierzchnię przylegania tkanki miękkiej, zapewniając naturalny wygląd.

Rodzaje łączników odpowiednie dla wszystkich wskazań

Rodzaj	Wąski	Standardowy	Szeroki
Średnica	ø3,0/3,3	ø3,7/4,2/4,7/5,2	ø6,0/7,0/8,0
Długość	8/10/12/14	7/8/10/12/14	6/7/8/10/12
Połączenie	Double Hex	Hex	
Trzon	prosty	zwężany + prosty	
Gwint	gwint dwuzwojowy		gwint jednozwojowy

Jeden zestaw chirurgiczny z prostą sekwencją

OneQ-SL

– implant wąski

(rozmiar $\varnothing 3,0$, $\varnothing 3,3$)


$\varnothing 3,0/3,3$ (szczeka)



$\varnothing 3,0/3,3$ (żuchwa)




Wąska przestrzeń międzyzębowa

- Wąski i prosty trzon może ułatwić kontrolowanie głębokości i zmniejszyć kontakt z sąsiadującymi zębami.

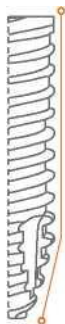

Powierzchnia S.L.A.

- Powierzchnia mocniejsza o 177% w porównaniu z RBM ($Ra\ 1,59\ \mu m$).
- Skuteczna i szybka osseointegracja.

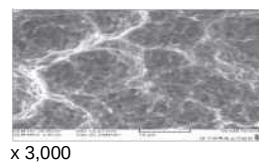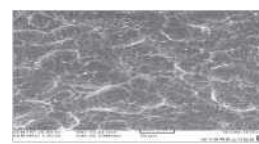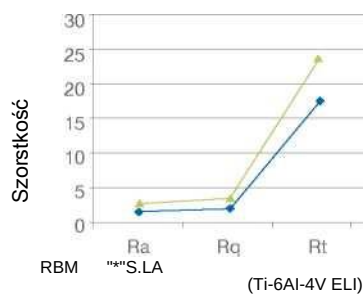




Implant wąski

Wąski implant OneQ-SL ma wyjątkowy wzór i bardzo cienki trzon oraz zmianę platform o średnicy 3,0 mm i 3,3 mm.


Zmiana platform o średnicy 3,0 mm i 3,3 mm ma bardzo dużą wytrzymałość zmęczeniową i osiąga najlepsze wyniki porównawcze, co sprawia, że jest to najlepszy i najpopularniejszy implant z wąską platformą.

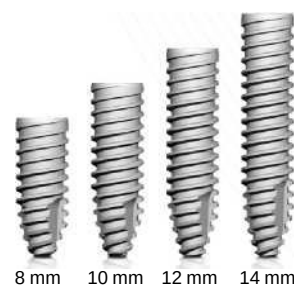

OneQ-SL – implant standardowy

(rozmiar $\emptyset 3,7$, $\emptyset 4,2$, $\emptyset 4,7$, $\emptyset 5,2$)


$\emptyset 3,7/4,2/4,7/5,2$ (szczeka)

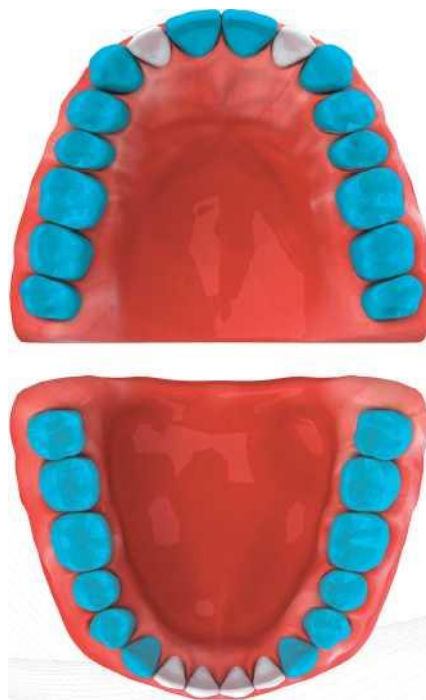

$\emptyset 3,7/4,2/4,7/5,2$ (żuchwa)


Dla wszystkich wskazań

- Podwójnie zwężany trzon.
- Prosty trzon może ułatwić kontrolowanie głębokości.
- Zwężana głowa zagęszcza kość i ułatwia początkowe mocowanie nawet w przypadku kości zmienionej chorobowo.

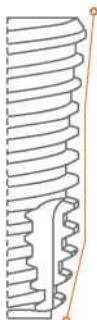


Powierzchnia S.L.A.

- Powierzchnia mocniejsza o 200% w porównaniu z RBM.
- Skuteczna i doskonała osseointegracja.
- Najmniejsze ilości osadów.

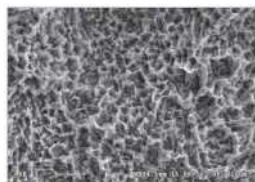

x 2,000

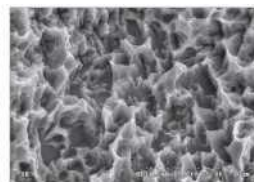


x 5,000



Implant standardowy

Implant standardowy OneQ-SL to najpopularniejszy rozmiar implantu, zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić wstawienie z podwójnie zwięzłym wzorem, jednocześnie zapewniając doskonałą stabilność początkową.

Zmienny gwint i krawędź tnąca umożliwiają samogwintowanie, zapewniając świetne rozwiązania dla kości w różnym stanie.

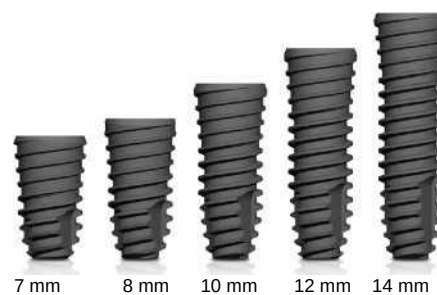

OneQ-SL – implant szeroki

(rozmiar $\varnothing 6,0$, $\varnothing 7,0$, $\varnothing 8,0$)

Mniejszy nacisk i stabilność

- Podwójnie zwężany trzon zagęszcza kość.
- Pojedynczy gwint zmniejsza nacisk na kość.
- Czubek z krawędzią tnącą przyspiesza samogwintowanie i zmniejsza osteotomię, co pozwala na szybszą stabilizację.




Powierzchnia S.L.A.

- Adhezja komórek i zróżnicowanie komórek osteoblastopodobnych MG-63 na powierzchni SLA są o 20% większe w porównaniu z powierzchnią RBM.




Powierzchnia RBM

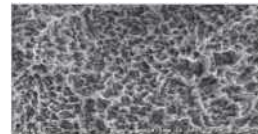

x 2,000




Powierzchnia S.L.A.

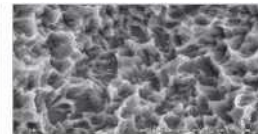


x 5,000



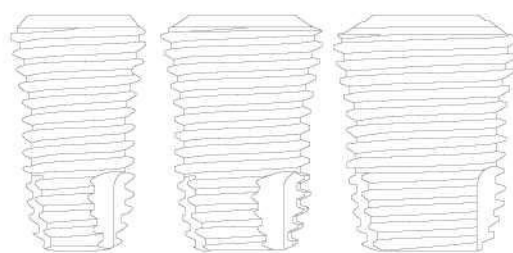


Implant szeroki

Szeroki implant OneQ-SL znacznie poprawia możliwości leczenia, ponieważ może być stosowany w różnych przypadkach klinicznych. Może być przydatny w przypadku zębodołu po usunięciu tylnego zęba, a nawet implantu, który się nie przyjął.

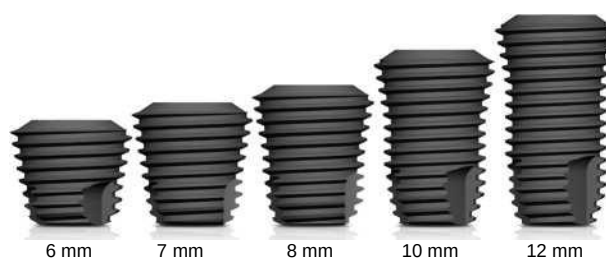


OneQ-SL – rodzaje implantów

Linia wąska Materiał: Ti-6Al-4V ELI

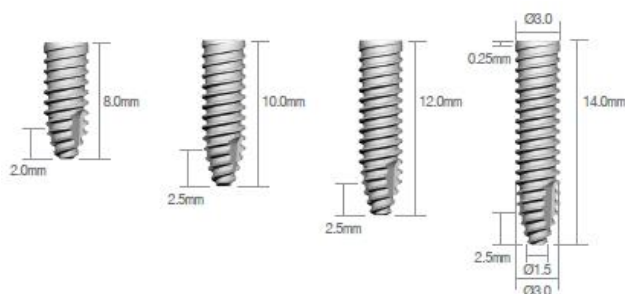

Wąski		
Średnica implantu	Długość	Nr kodu
Ø3,0	8,0 mm	DSSOFS3008S
	10,0 mm	DSSOFS3010S
	12,0 mm	DSSOFS3012S
	14,0 mm	DSSOFS3014S

Kod(y): śruba + śruba mocująca [DSOFCS]

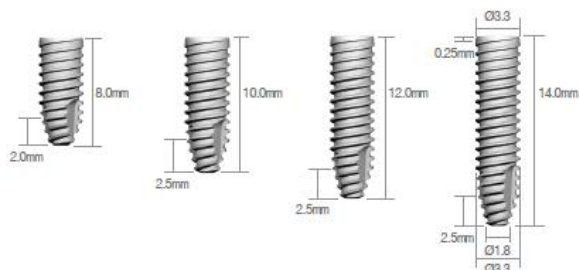

Wąski		
Średnica implantu	Długość	Nr kodu
Ø3,3	8,0 mm	DSSOFS3308S
	10,0 mm	DSSOFS3310S
	12,0 mm	DSSOFS3312S
	14,0 mm	DSSOFS3314S

Kod(y): śruba + śruba mocująca [DSOFCS]

Linia standardowa Materiał: Pure-Ti Grade 4



Wąski		
Średnica implantu	Długość	Nr kodu
Ø3,7	7,0 mm	DSSOFM3707S
	8,0 mm	DSSOFM3708S
	10,0 mm	DSSOFM3710S
	12,0 mm	DSSOFM3712S
	14,0 mm	DSSOFM3714S

Kod(y): śruba + śruba mocująca [DSCSM]




Standardowy		
Średnica implantu	Długość	Nr kodu
Ø4,2	7,0 mm	DSSOFR4207S
	8,0 mm	DSSOFR4208S
	10,0 mm	DSSOFR4210S
	12,0 mm	DSSOFR4212S
	14,0 mm	DSSOFR4214S

Kod(y): śruba + śruba mocująca [DSCSM]



Standardowy		
Średnica implantu	Długość	Nr kodu
4,7	7,0 mm	DSSOFR4707S
	8,0 mm	DSSOFR4708S
	10,0 mm	DSSOFR4710S
	12,0 mm	DSSOFR4712S
	14,0 mm	DSSOFR4714S

Kod(y): śruba + śruba mocująca [DSCSM]

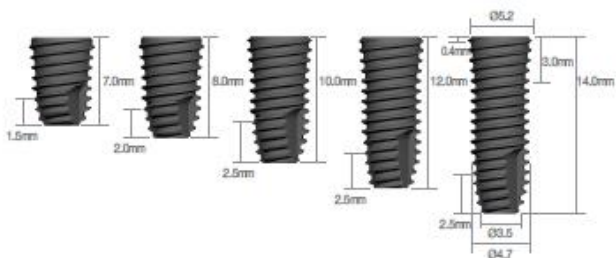

Standardowy		
Średnica implantu	Długość	Nr kodu
Ø5,2	7,0 mm	DSSOFR5207S
	8,0 mm	DSSOFR5208S
	10,0 mm	DSSOFR5210S
	12,0 mm	DSSOFR5212S
	14,0 mm	DSSOFR5214S

Kod(y): śruba + śruba mocująca [DSCSM]

Linia szeroka Materiał: Pure-Ti Grade 4



Należy używać tylko implantów o średnicy 6 mm.

Szeroki		
Średnica implantu	Długość	Nr kodu
Ø6,0	6,0 mm	DSSOFW6006S
	7,0 mm	DSSOFW6007S
	8,0 mm	DSSOFW6008S
	10,0 mm	DSSOFW6010S
	12,0 mm	DSSOFW6012S

Kod(y): śruba + śruba mocująca [DSCSM]

Należy używać tylko implantów o średnicy 6 mm.

Szeroki		
Średnica implantu	Długość	Nr kodu
Ø7,0	6,0 mm	DSSOFW7006S
	7,0 mm	DSSOFW7007S
	8,0 mm	DSSOFW7008S
	10,0 mm	DSSOFW7010S
	12,0 mm	DSSOFW7012S

Kod(y): śruba + śruba mocująca [DSCSM]

Należy używać tylko implantów o średnicy 6 mm.

Szeroki		
Średnica implantu	Długość	Nr kodu
Ø8,0	6,0 mm	DSSOFW8006S
	7,0 mm	DSSOFW8007S
	8,0 mm	DSSOFW8008S
	10,0 mm	DSSOFW8010S
	12,0 mm	DSSOFW8012S

Kod(y): śruba + śruba mocująca [DSCSM]



Śruby mocujące i łączniki gojące

► A/D: średnica łącznika ► P/H: wysokość sztyftu ► G/H: wysokość dziąsła

Śruba mocująca – wąska Zalecany moment dokręcenia – 10 Ncm



DSOFCS + DSSOFS3310

Nr kodu

DSOFCS




Śruba mocująca – standardowa / szeroka



DSCSM + DSSOFR4210

Nr kodu

DSCSM

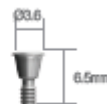


Łącznik gojący – wąski

Zalecany moment dokręcenia – 10 Ncm



DSHS4015 + DSSOFS3310

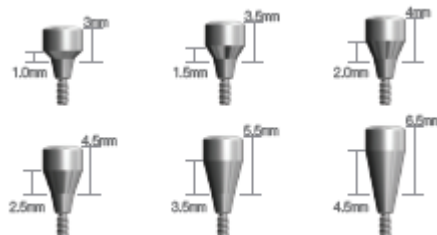


Średnica łącznika	G/H	Nr kodu
Ø4.0	1.0mm	DSHS4010
	1.5mm	DSHS4015
	2.0mm	DSHS4020
	2.5mm	DSHS4025
	3.5mm	DSHS4035
	4.5mm	DSHS4045

Łącznik gojący – standardowy / szeroki




DSH4520 + DSSOFR4210


Średnica łącznika	G/H	Nr kodu
Ø4.5	1.0mm	DSH4510
	1.5mm	DSH4515
	2.0mm	DSH4520
	2.5mm	DSH4525
	3.5mm	DSH4535
	4.5mm	DSH4545
	5.5mm	DSH4555
	7.5mm	DSH4565

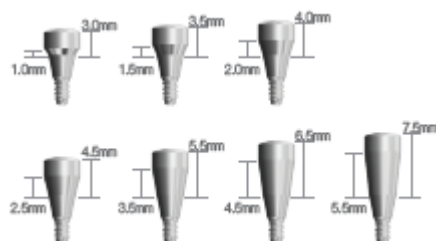


Średnica łącznika	G/H	Nr kodu
Ø5.5	1.0mm	DSH5510
	1.5mm	DSH5515
	2.0mm	DSH5520
	2.5mm	DSH5525
	3.5mm	DSH5535
	4.5mm	DSH5545
	5.5mm	DSH5555

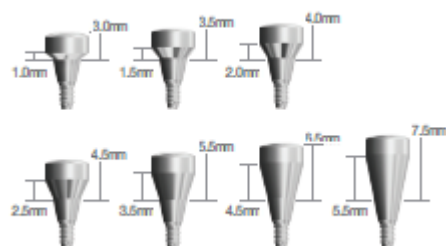

Średnica łącznika	G/H	Nr kodu
Ø6.5	1.5mm	DSH6515
	2.0mm	DSH6520
	2.5mm	DSH6525
	3.5mm	DSH6535
	4.5mm	DSH6545
	5.5mm	DSH6555

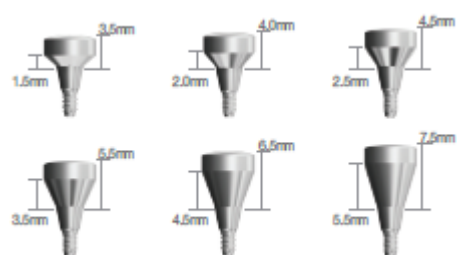

Średnica łącznika	G/H	Nr kodu
Ø7.5	1.5mm	DSH7515
	2.0mm	DSH7520
	2.5mm	DSH7525
	3.5mm	DSH7535
	4.5mm	DSH7545
	5.5mm	DSH7555

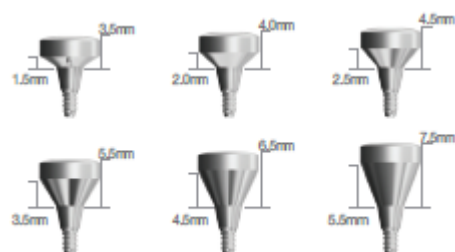

Schematy protetyczne dla OneQ Sole System


Wycisk na poziomie łącznika / Cementowanie

Implant wąski

Opis	Proces	Narzędzie
Plastikowy transfer	 pojedynczy mostek	 rozwiertak
Analog implantu		
Nakładka do wycisku		
Łącznik	 pojedynczy	 sześciokątny wkręt 1,25
	 śruba mocująca łącznik gojący	 sześciokątny wkręt 1,25
Implant OneQ	 OneQ-SI wąski standardowy szeroki	 wkręt bez nasadki wkręt zębatkowy

Łącznik pojedynczy – wąski


Zalecany moment obrotowy: wąski – 20 Ncm, standardowy / szeroki – 30 Ncm

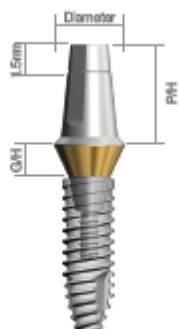

DSSAS40205TS + DSSOFS3310


Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.0	1.0mm	5.5mm	DSSAS40105TS
	2.0mm		DSSAS40205TS
	2.5mm		DSSAS40255TS
	3.5mm		DSSAS40355TS
	4.5mm		DSSAS40455TS

Kod(y): łącznik + nasadka gojąca [DSSASHC405]

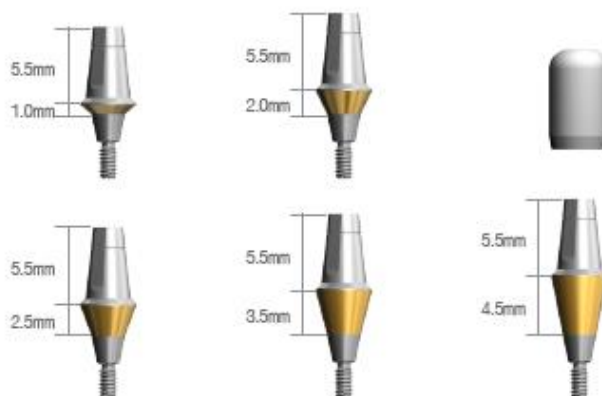

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.0	1.0mm	7.0mm	DSSAS40107TS
	2.0mm		DSSAS40207TS
	2.5mm		DSSAS40257TS
	3.5mm		DSSAS40357TS
	4.5mm		DSSAS40457TS

Kod(y): łącznik + nasadka gojąca [DSSASHC407]

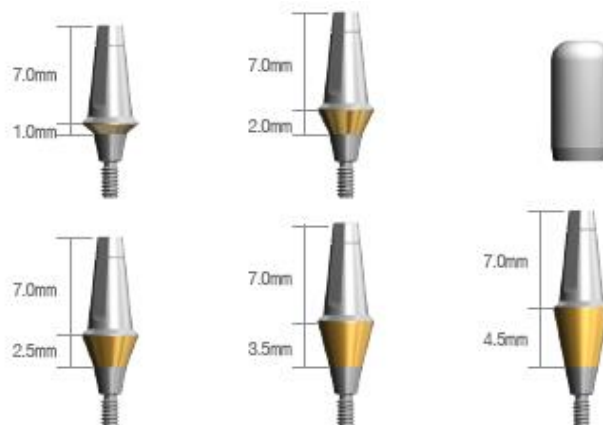

Łącznik pojedynczy – standardowy / szeroki



DSSA5520PCTS + DSSOFR4210

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.5	1.0mm	5.5mm	DSSA4510PCTS
	1.5mm		DSSA4515PCTS
	2.0mm		DSSA4520PCTS
	2.5mm		DSSA4525PCTS
	3.5mm		DSSA4535PCTS
	4.5mm		DSSA4545PCTS
	5.5mm		DSSA4555PCTS


Kod(y): łącznik + nasadka gojąca [DSHC455]


Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø5.5	1.0mm	5.5mm	DSSA5510PCTS
	1.5mm		DSSA5515PCTS
	2.0mm		DSSA5520PCTS
	2.5mm		DSSA5525PCTS
	3.5mm		DSSA5535PCTS
	4.5mm		DSSA5545PCTS
	5.5mm		DSSA5555PCTS

Kod(y): łącznik + nasadka gojąca [DSHC555]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø6.5	1.0mm	5.5mm	DSSA6510PCTS
	1.5mm		DSSA6515PCTS
	2.0mm		DSSA6520PCTS
	2.5mm		DSSA6525PCTS
	3.5mm		DSSA6535PCTS
	4.5mm		DSSA6545PCTS
	5.5mm		DSSA6555PCTS

Kod(y): łącznik + nasadka gojąca [DSHC655]

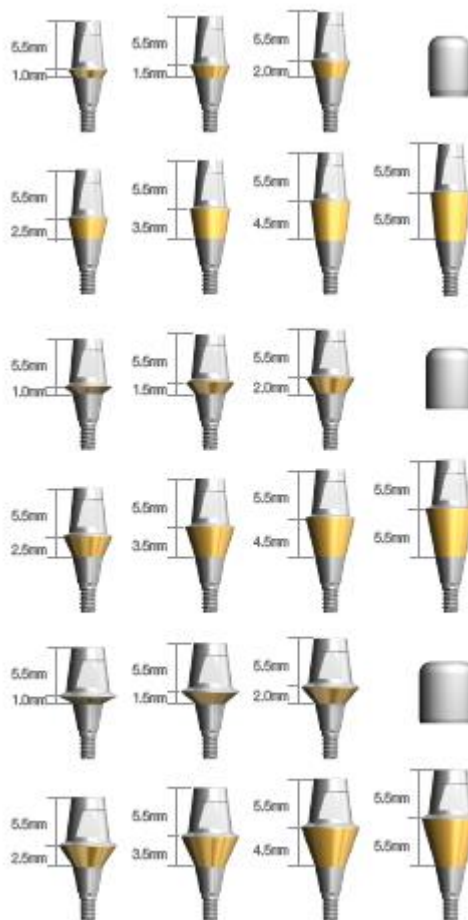

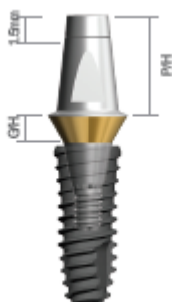

DSSA55207PCTS + DSSOFR4210

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.5	1.0mm	7.0mm	DSSA45107PCTS
	1.5mm		DSSA45157PCTS
	2.0mm		DSSA45207PCTS
	2.5mm		DSSA45257PCTS
	3.5mm		DSSA45357PCTS
	4.5mm		DSSA45457PCTS
	5.5mm		DSSA45557PCTS


Kod(y): łącznik + nasadka gojąca [DSHC457]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø5.5	1.0mm	7.0mm	DSSA55107PCTS
	1.5mm		DSSA55157PCTS
	2.0mm		DSSA55207PCTS
	2.5mm		DSSA55257PCTS
	3.5mm		DSSA55357PCTS
	4.5mm		DSSA55457PCTS
	5.5mm		DSSA55557PCTS

Kod(y): łącznik + nasadka gojąca [DSHC557]


Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø6.5	1.0mm	7.0mm	DSSA65107PCTS
	1.5mm		DSSA65157PCTS
	2.0mm		DSSA65207PCTS
	2.5mm		DSSA65257PCTS
	3.5mm		DSSA65357PCTS
	4.5mm		DSSA65457PCTS
	5.5mm		DSSA65557PCTS

Kod(y): łącznik + nasadka gojąca [DSHC657]

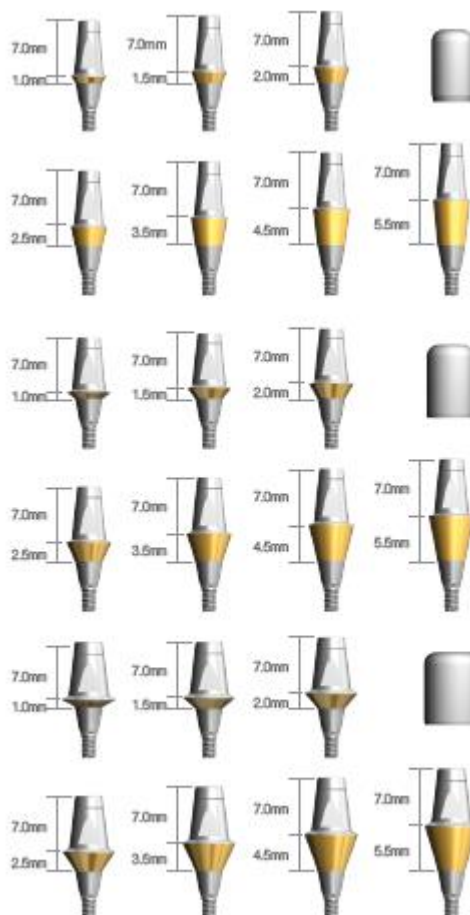

Pojedyncza nasadka łącznika gojącego – wąska

Średnica łącznika	P/H	Nr kodu
Ø4.0	5.5mm 7.0mm	DSSASHC405 DSSASHC407

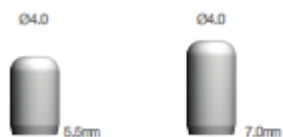

Pojedyncza nasadka gojąca – szeroka

Średnica łącznika	P/H	Nr kodu
Ø4.5	5.5mm 7.0mm	DSHC455 DSHC457
Ø5.5	5.5mm 7.0mm	DSHC555 DSHC557
Ø6.5	5.5mm 7.0mm	DSHC655 DSHC657



Analog implantu – wąski

Średnica łącznika	P/H	Nr kodu
Ø4.0	5.5mm 7.0mm	DSSLAS405 DSSLAS407



Analog implantu – standardowy / szeroki

Średnica łącznika	P/H	Nr kodu
Ø4.5	5.5mm 7.0mm	DSSLA45 DSSLA457
Ø5.5	5.5mm 7.0mm	DSSLA55 DSSLA557
Ø6.5	5.5mm 7.0mm	DSSLA65 DSSLA657




Cylinder odlewowy do wycisku – wąski

Średnica łącznika	P/H	Nr kodu
Ø4,0	5.5mm 7.0mm	DSIPC3405 DSIPC3407



Cylinder odlewowy do wycisku – standardowy / szeroki

Średnica łącznika	P/H	Nr kodu
Ø4,5	5.5mm 7.0mm	DSIPC455 DSIPC457
Ø5,5	5.5mm 7.0mm	DSIPC555 DSIPC557
Ø6,5	5.5mm 7.0mm	DSIPC655 DSIPC657

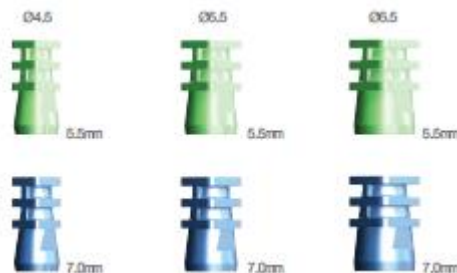


Plastikowy transfer – wąski

Średnica łącznika	Rodzaj	Nr kodu
Ø4,5	pojedynczy mostek	DSSAP40S DSSASP40B



Plastikowy transfer – standardowy / szeroki

Średnica łącznika	Rodzaj	Nr kodu
Ø4,5	pojedynczy mostek	DSSAP45S DSSASP45B
Średnica łącznika	Rodzaj	Nr kodu
Ø5,5	pojedynczy mostek	DSSAP55S DSSASP55B
Średnica łącznika	Rodzaj	Nr kodu
Ø6,5	pojedynczy mostek	DSSAP65S DSSASP65B

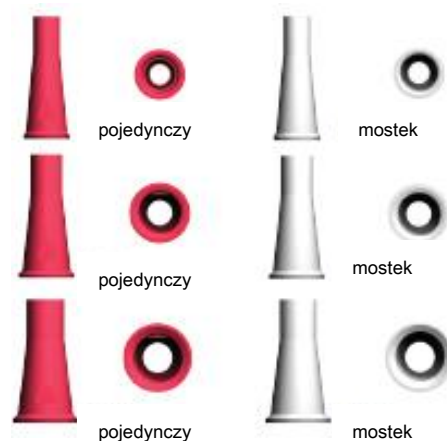

Schematy protetyczne dla OneQ Couple System

Wycisk na poziomie śruby / Cementowanie / Odtworzenie przy użyciu śruby

Implant wąski

Opis	Proces	Narzędzie
Śruba		 sześciokątny wkręt 1,25
Analog implantu		
Nakładka do wycisku	 podnoszenie transfer	 sześciokątny wkręt 1,25
Łącznik	 podwójny FreeMill Gold UCLA DCM UCLA skrętny Max tytanowy tymczasowy EBK	 sześciokątny wkręt 1,25
	 śruba mocująca łącznik gojący	 sześciokątny wkręt 1,25
Implant OneQ	 OneQ-SL wąski standardowy szeroki	 wkręt bez nasadki  wkręt zębatkowy

Łącznik podwójny – wąski [Hex]

Zalecany moment dokręcenia: wąski – 20 Ncm, standardowy / szeroki – 30 Ncm



DSCAS40206HTS + DSSOFS3310 DSCAS40206NTS + DSSOFS3310

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.0	1.0mm	5.5mm	DSCAS40106HTS
	2.0mm		DSCAS40206HTS
	2.5mm		DSCAS40256HTS
	3.5mm		DSCAS40356HTS
	4.5mm		DSCAS40456HTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSASS]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.0	1.0mm	7.0mm	DSCAS40107HTS
	2.0mm		DSCAS40207HTS
	2.5mm		DSCAS40257HTS
	3.5mm		DSCAS40357HTS
	4.5mm		DSCAS40457HTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSASS]

Łącznik podwójny – wąski [N-Hex]



Zalecany moment dokręcenia - Wąski – 20 Ncm / Standardowy, szeroki – 30 Ncm

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.0	1.0mm	5.5mm	DSCAS40106NTS
	2.0mm		DSCAS40206NTS
	2.5mm		DSCAS40256NTS
	3.5mm		DSCAS40356NTS
	4.5mm		DSCAS40456NTS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSASS]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.0	1.0mm	7.0mm	DSCAS40107NTS
	2.0mm		DSCAS40207NTS
	2.5mm		DSCAS40257NTS
	3.5mm		DSCAS40357NTS
	4.5mm		DSCAS40457NTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSASS]

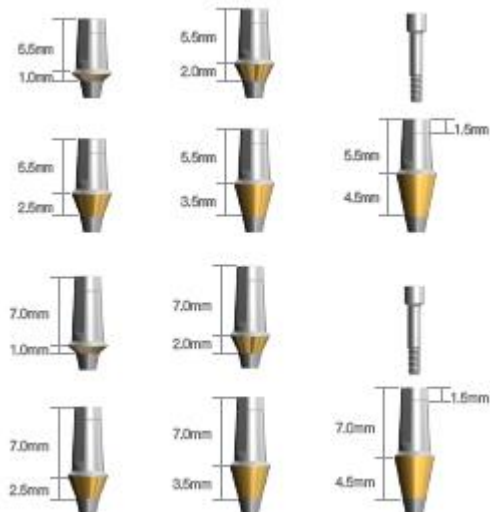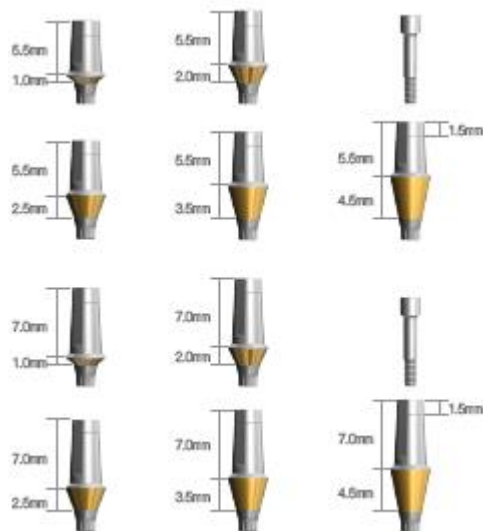

Łącznik podwójny – standardowy / szeroki [Hex]

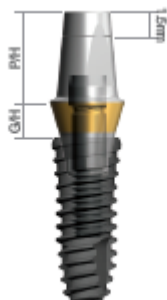

DSCA4520HPCTS + DSSOFR4210

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.5	1.0mm	5.5mm	DSCA4510HPCTS
	1.5mm		DSCA4515HPCTS
	2.0mm		DSCA4520HPCTS
	2.5mm		DSCA4525HPCTS
	3.5mm		DSCA4535HPCTS
	4.5mm		DSCA4545HPCTS
	5.5mm		DSCA4555HPCTS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]


Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø5.5	1.0mm	5.5mm	DSCA5510HPCTS
	1.5mm		DSCA5515HPCTS
	2.0mm		DSCA5520HPCTS
	2.5mm		DSCA5525HPCTS
	3.5mm		DSCA5535HPCTS
	4.5mm		DSCA5545HPCTS
	5.5mm		DSCA5555HPCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø6.5	1.0mm	5.5mm	DSCA6510HPCTS
	1.5mm		DSCA6515HPCTS
	2.0mm		DSCA6520HPCTS
	2.5mm		DSCA6525HPCTS
	3.5mm		DSCA6535HPCTS
	4.5mm		DSCA6545HPCTS
	5.5mm		DSCA6555HPCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

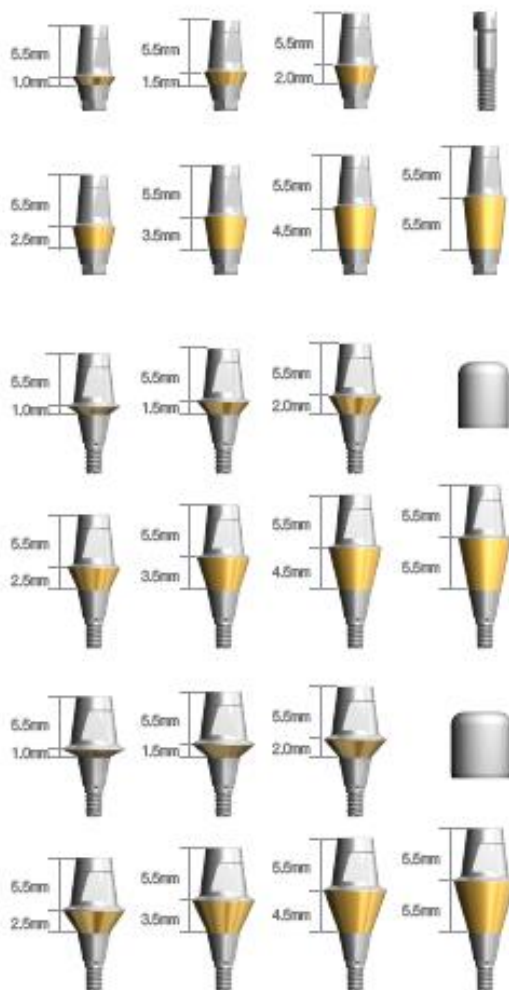


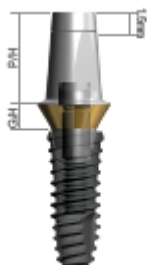

DSCA5520H7PCTS + DSSOFR4210

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.5	1.0mm	7mm	DSCA4510H7PCTS
	1.5mm		DSCA4515H7PCTS
	2.0mm		DSCA4520H7PCTS
	2.5mm		DSCA4525H7PCTS
	3.5mm		DSCA4535H7PCTS
	4.5mm		DSCA4545H7PCTS
	5.5mm		DSCA4555H7PCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

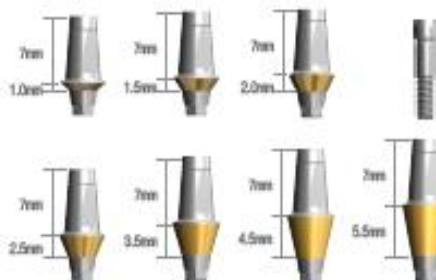


Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø5.5	1.0mm	7mm	DSCA5510H7PCTS
	1.5mm		DSCA5515H7PCTS
	2.0mm		DSCA5520H7PCTS
	2.5mm		DSCA5525H7PCTS
	3.5mm		DSCA5535H7PCTS
	4.5mm		DSCA5545H7PCTS
	5.5mm		DSCA5555H7PCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø6.5	1.5mm	7mm	DSCA6515H7PCTS
	2.0mm		DSCA6520H7PCTS
	2.5mm		DSCA6525H7PCTS
	3.5mm		DSCA6535H7PCTS
	4.5mm		DSCA6545H7PCTS
	5.5mm		DSCA6555H7PCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Łącznik podwójny – standardowy / szeroki [N-Hex]

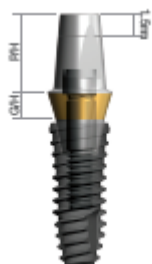

DSCA4520NPCTS + DSSOFR4210

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4,5	1.0mm	5.5mm	DSCA4510NPCTS
	1.5mm		DSCA4515NPCTS
	2.0mm		DSCA4520NPCTS
	2.5mm		DSCA4525NPCTS
	3.5mm		DSCA4535NPCTS
	4.5mm		DSCA4545NPCTS
	5.5mm		DSCA4555NPCTS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø5,5	1.0mm	5.5mm	DSCA5510NPCTS
	1.5mm		DSCA5515NPCTS
	2.0mm		DSCA5520NPCTS
	2.5mm		DSCA5525NPCTS
	3.5mm		DSCA5535NPCTS
	4.5mm		DSCA5545NPCTS
	5.5mm		DSCA5555NPCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø6,5	1.0mm	5.5mm	DSCA6510NPCTS
	1.5mm		DSCA6515NPCTS
	2.0mm		DSCA6520NPCTS
	2.5mm		DSCA6525NPCTS
	3.5mm		DSCA6535NPCTS
	4.5mm		DSCA6545NPCTS
	5.5mm		DSCA6555NPCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

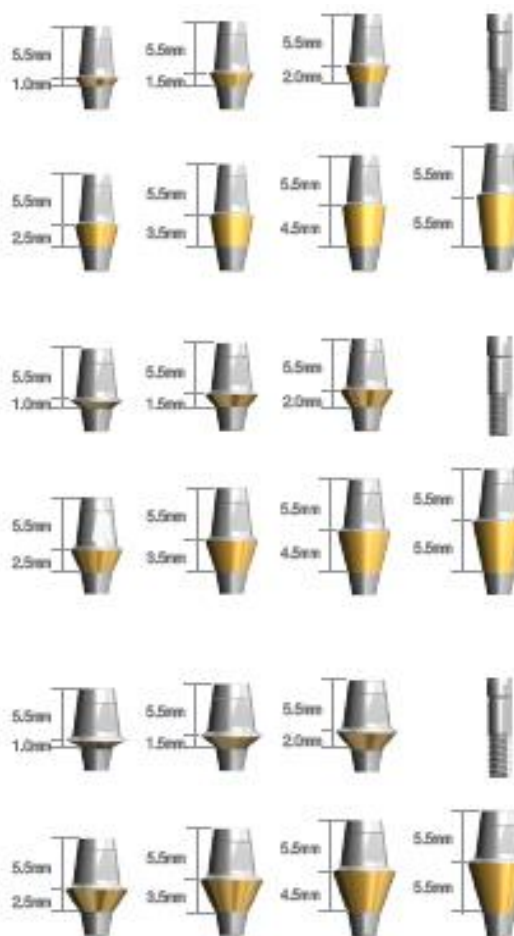



DSCA5520N7PCTS + DSSOFR4210

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.5	1.0mm	7mm	DSCA4510N7PCTS
	1.5mm		DSCA4515N7PCTS
	2.0mm		DSCA4520N7PCTS
	2.5mm		DSCA4525N7PCTS
	3.5mm		DSCA4535N7PCTS
	4.5mm		DSCA4545N7PCTS
	5.5mm		DSCA4555N7PCTS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø5.5	1.0mm	7mm	DSCA5510N7PCTS
	1.5mm		DSCA5515N7PCTS
	2.0mm		DSCA5520N7PCTS
	2.5mm		DSCA5525N7PCTS
	3.5mm		DSCA5535N7PCTS
	4.5mm		DSCA5545N7PCTS
	5.5mm		DSCA5555N7PCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø6.5	1.5mm	7mm	DSCA6515N7PCTS
	2.0mm		DSCA6520N7PCTS
	2.5mm		DSCA6525N7PCTS
	3.5mm		DSCA6535N7PCTS
	4.5mm		DSCA6545N7PCTS
	5.5mm		DSCA6555N7PCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

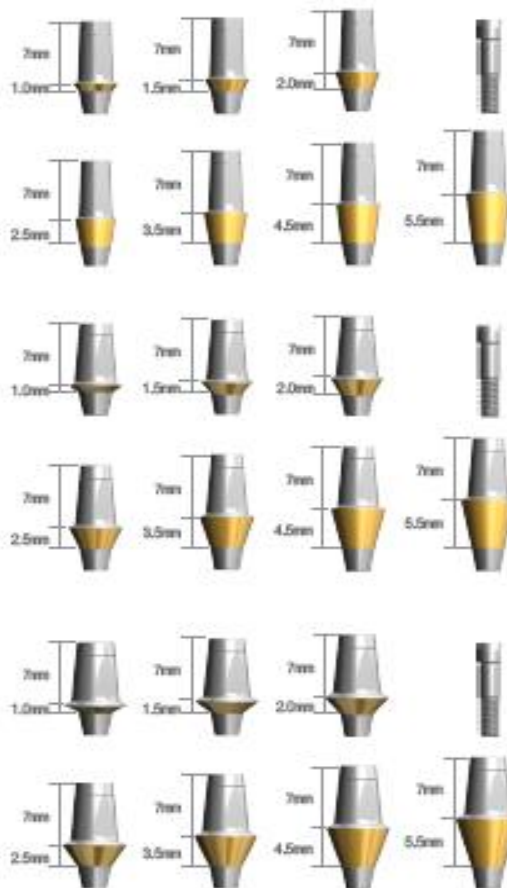

Łącznik FreeMill – standardowy / szeroki [Hex / N-Hex]



DSFMA5520HHCTS + DSSOFR4210 DSFMA5520NHCTS + DSSOFR4210

Średnica łącznika	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø4.0	1.5mm	Hex N-Hex	DSFMA4015HHCTS DSFMA4015NHCTS
	3.0mm	Hex N-Hex	DSFMA4030HHCTS DSFMA4030NHCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø4.5	2.0mm	Hex N-Hex	DSFMA4520HHCTS DSFMA4520NHCTS
	3.0mm	Hex N-Hex	DSFMA4530HHCTS DSFMA4530NHCTS





Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø5.5	2.0mm	Hex N-Hex	DSFMA5520HHCTS DSFMA5520NHCTS
	3.0mm	Hex N-Hex	DSFMA5530HHCTS DSFMA5530NHCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø6.5	2.0mm	Hex N-Hex	DSFMA6520HHCTS DSFMA6520NHCTS
	4.0mm	Hex N-Hex	DSFMA6540HHCTS DSFMA6540NHCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

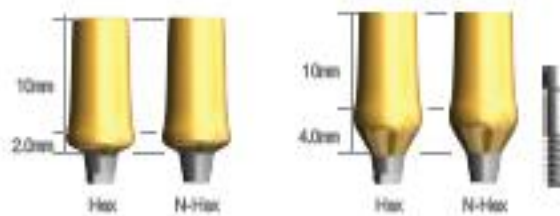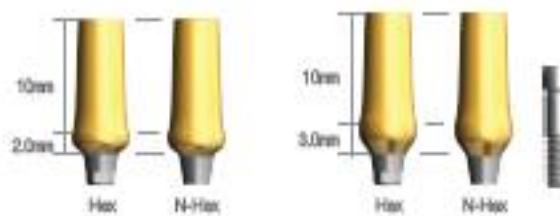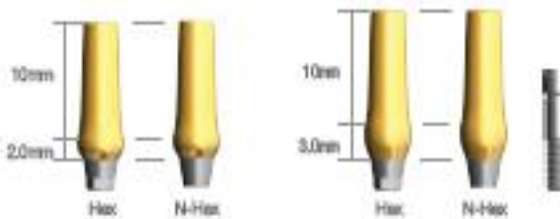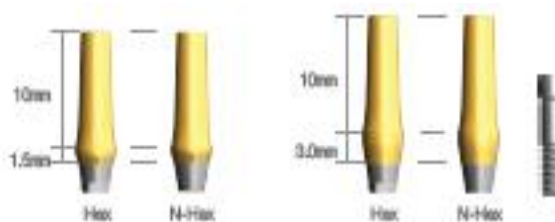


Łącznik MOA



DSMA55305HCTS + DSSOFR4210


Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.5	2.8	7.0	DSMA45307HCTS
Ø5.5	2.8	5.5	DSMA55305HCTS

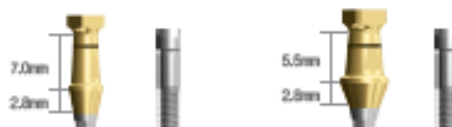

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSASS]


Łącznik skośny – wąski [15°]

Zalecany moment dokręcenia: wąski – 20 Ncm, standardowy / szeroki – 30 Ncm

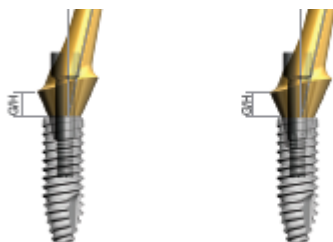


DSAAS40152HTS + DSSOF83310 DSAAS40152NTS + DSSOF83310

Średnica łącznika	G/H	P/H	Nr kodu
Ø4.0	15°	2mm	Hex N-Hex
		4mm	Hex N-Hex
			DSAAS40152HTS DSAAS40152NTS
			DSAAS40154HTS DSAAS40154NTS

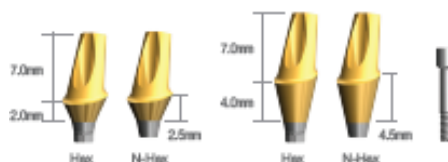

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSASS]

Łącznik skośny – standardowy / szeroki [15°]

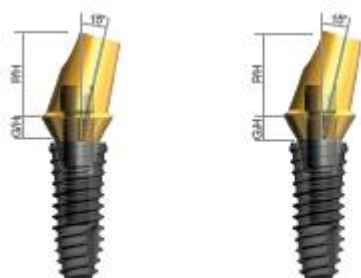

DSAA55152HCTS + DS8OFR4210 DSAA55152NCTS + DS8OFR4210

Średnica łącznika	Kąt	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø4.5	15°	1mm	Hex N-Hex	DSAA45151HCTS DSAA45151NHCTS
		2mm	Hex N-Hex	DSAA45152HCTS DSAA45152NHCTS
		4mm	Hex N-Hex	DSAA45154HCTS DSAA45154NHCTS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika
[1 mm – DSAS1 / 2,4 mm – DSAS]

Średnica łącznika	Kąt	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø5.5	15°	1mm	Hex N-Hex	DSAA55151HCTS DSAA55151NHCTS
		2mm	Hex N-Hex	DSAA55152HCTS DSAA55152NHCTS
		4mm	Hex N-Hex	DSAA55154HCTS DSAA55154NHCTS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika
[1 mm – DSAS1 / 2,4 mm – DSAS]

Średnica łącznika	Kąt	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø6.5	15°	1mm	Hex N-Hex	DSAA65151HCTS DSAA65151NHCTS
		2mm	Hex N-Hex	DSAA65152HCTS DSAA65152NHCTS
		4mm	Hex N-Hex	DSAA65154HCTS DSAA65154NHCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika
[1 mm – DSAS1 / 2,4 mm – DSAS]

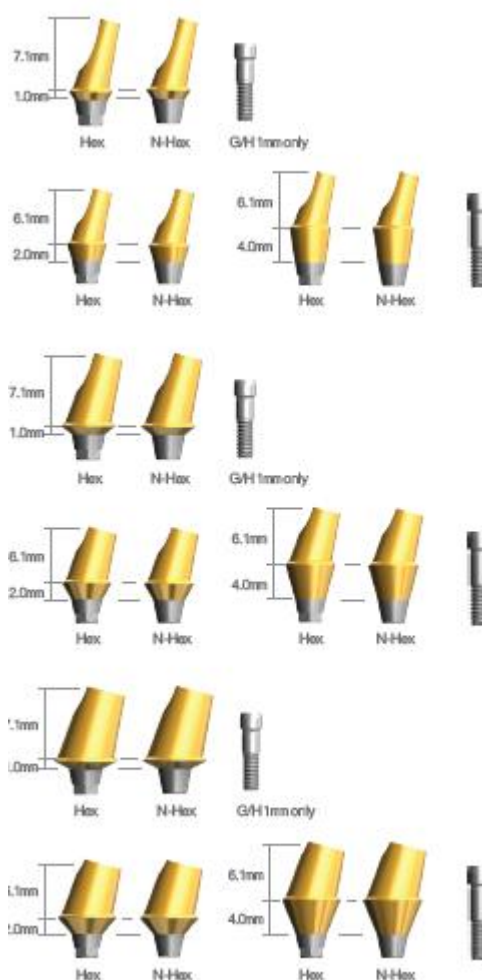

Łącznik skośny – standardowy / szeroki [25°]

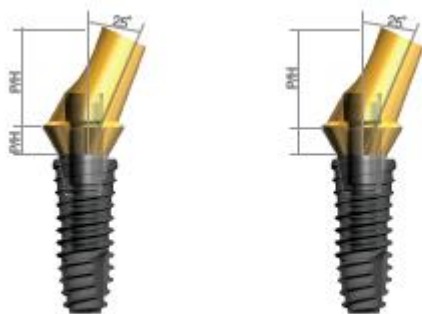

DSAA55252HCTS + DSSOFR4210 DSAA55252NCTS + DSSOFR4210

Średnica łącznika	Kąt	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø4.5	25°	1mm	Hex N-Hex	DSAA45251HCTS DSAA45251NHCTS
		2mm	Hex N-Hex	DSAA45252HCTS DSAA45252NHCTS
		4mm	Hex N-Hex	DSAA45254HCTS DSAA45254NHCTS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika
[1 mm – DSAS1 / 2,4 mm – DSAS]

Średnica łącznika	Kąt	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø5.5	25°	1mm	Hex N-Hex	DSAA55251HCTS DSAA55251NHCTS
		2mm	Hex N-Hex	DSAA55252HCTS DSAA55252NHCTS
		4mm	Hex N-Hex	DSAA55254HCTS DSAA55254NHCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika
[1 mm – DSAS1 / 2,4 mm – DSAS]

Średnica łącznika	Kąt	G/H	Rodzaj	Nr kodu
Ø6.5	25°	1mm	Hex N-Hex	DSAA65251HCTS DSAA65251NHCTS
		2mm	Hex N-Hex	DSAA65252HCTS DSAA65252NHCTS
		4mm	Hex N-Hex	DSAA65254HCTS DSAA65254NHCTS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika
[1 mm – DSAS1 / 2,4 mm – DSAS]

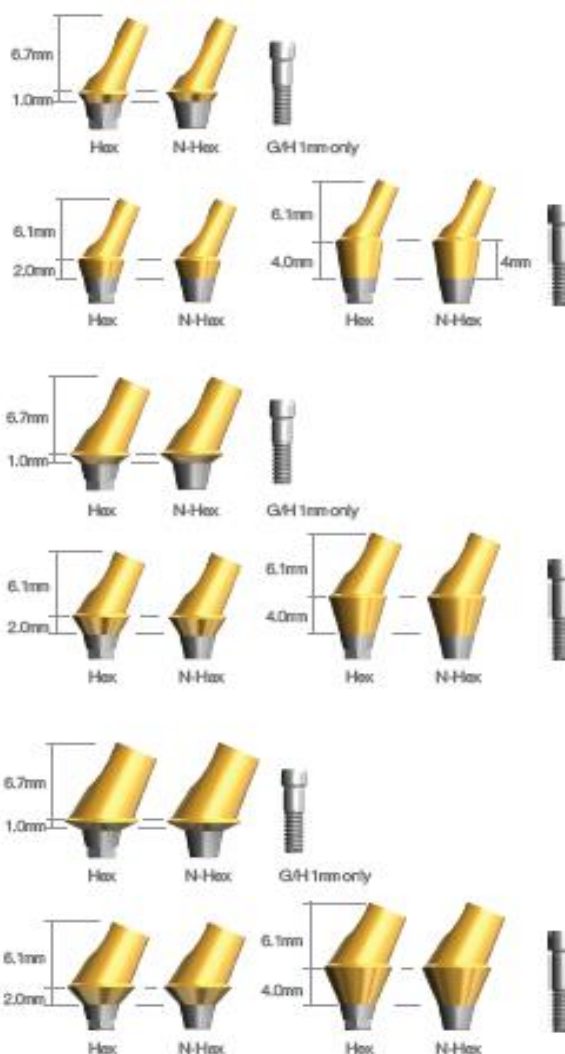


Gold UCLA – wąski

Zalecany moment dokręcenia: wąski – 20 Ncm, standardowy / szeroki – 30 Ncm

Średnica łącznika	Rodzaj	Nr kodu
Ø4.0	Hex	DSGUASHS
	N-Hex	DSGUASNS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSASS]

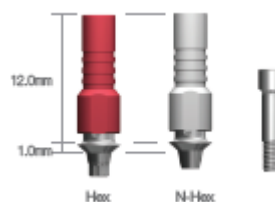

Gold UCLA – standardowy / szeroki

Średnica łącznika	Rodzaj	Nr kodu
Ø4.5	Hex	DSGCHS
	N-Hex	DSGCNS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

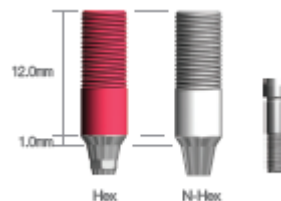


CCM UCLA – wąski

Zalecany moment dokręcenia: wąski – 20 Ncm, standardowy / szeroki – 30 Ncm

Średnica łącznika	Rodzaj	Nr kodu
Ø4.0	Hex	DSCUASHS
	N-Hex	DSCUASNS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSASS]

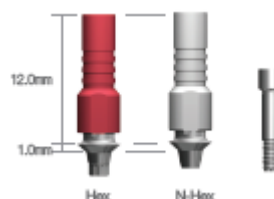

Gold UCLA – standardowy / szeroki


Średnica łącznika	Rodzaj	Nr kodu
Ø4.5	Hex	DSCUAHS
	N-Hex	DSCUANS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

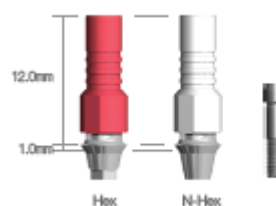

Śruba łącznika

Rodzaj	Nr kodu
Wąski	DSASS
Standardowy / szeroki	DSAS
Skośny G/H tylko 1 mm	DSAS1
Tylko implant o dł. 6 mm	DSAS6
Utrzymujący MU	DMRTS
Łącznik MU	DSMAS10/20/30/40
Skośny MU	DSMAS

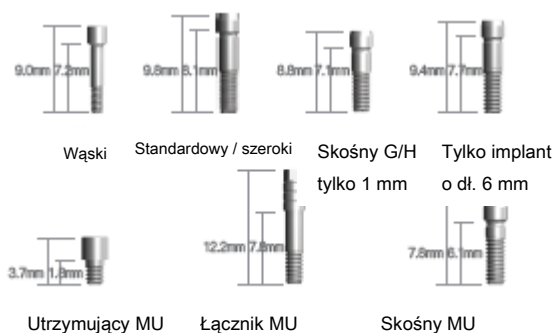

Łącznik tymczasowy – wąski

Zalecany moment dokręcenia: wąski – 20 Ncm, standardowy / szeroki – 30 Ncm

Średnica łącznika	Materiał	Rodzaj	Nr kodu
Ø4,0	Tytan	Hex	DSTAS40HS
		N-Hex	DSTAS40NS
	PEEK	Hex	DSPTS40HS
		N-Hex	DSPTS40NS



Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]


Łącznik tymczasowy – standardowy / szeroki

Średnica łącznika	Materiał	Rodzaj	Nr kodu
Ø4,5	Tytan	Hex	DSTA45HS
		N-Hex	DSTA45NS
	PEEK	Hex	DSPT45HS
		N-Hex	DSPT45NS




Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	Materiał	Rodzaj	Nr kodu
Ø5,5	Tytan	Hex	DSTA55HS
		N-Hex	DSTA55NS
	PEEK	Hex	DSPT55HS
		N-Hex	DSPT55NS

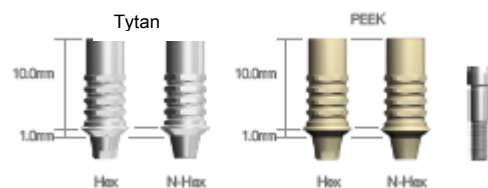

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Średnica łącznika	Materiał	Rodzaj	Nr kodu
Ø6,5	Tytan	Hex	DSTA65HS
		N-Hex	DSTA65NS
	PEEK	Hex	DSPT65HS
		N-Hex	DSPT65NS

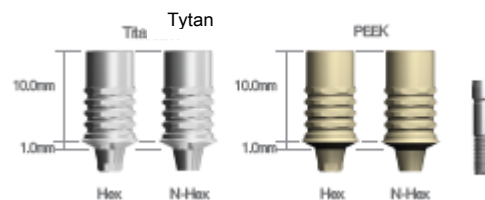


Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSAS]

Podnosząca nakładka do wycisku – wąska

Średnica łącznika	Rodzaj	Wysokość	Nr kodu
Ø4,0	Hex	krótka	DSIHS40SS
	N-Hex	długa	DSIHS40LS
	Hex	krótka	DSINS40SS
	N-Hex	długa	DSINS40LS

Kod(y): trzon wycisku + Pln

[Krótki – DSGPS15 / Długi – DSGPS19]

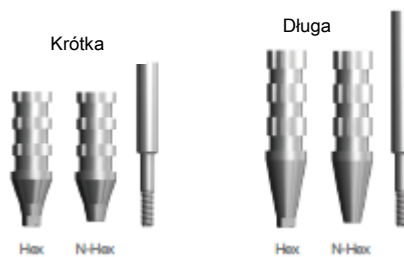

Jednotrzonowa nakładka do wycisku – wąska

Średnica łącznika	Wysokość	Nr kodu
Ø4,0	krótka	DSOTICS40S
	długa	DSOTICS40L



Nakładka do wycisku – wąska

Średnica łącznika	Rodzaj	Wysokość	Nr kodu
Ø4,0	Hex	krótka	DSSITHS40SS
	Hex	długa	DSITHS40LS
	N-Hex	krótka	DSITNS40SS
	N-Hex	długa	DSITNS40LS



Kod(y): trzon wycisku + Pln


[Krótki – DSTSS / Długi – DSTLS]

Nakładka do wycisku – standardowa / szeroka

Średnica łącznika	Rodzaj	Wysokość	Nr kodu
Ø4,5	Hex	krótka	DSSIH45SS
		długa	DSIH45LS
	N-Hex	krótka	DSIN45SS
		długa	DSIN45LS

Kod(y): trzon wycisku + Pln


[Krótki – DSGP15 / Długi – DSGPS19]

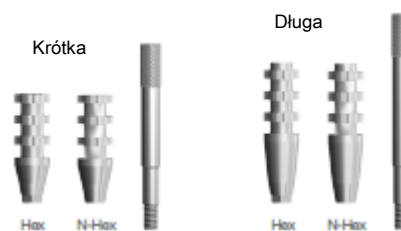

Średnica łącznika	Rodzaj	Wysokość	Nr kodu
Ø5,5	Hex	krótka	DSSIH55SS
		długa	DSIH55LS
	N-Hex	krótka	DSIN55SS
		długa	DSIN55LS

Kod(y): trzon wycisku + Pln


[Krótki – DSGP15 / Długi – DSGPS19]

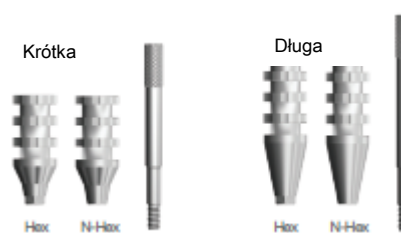

Średnica łącznika	Rodzaj	Wysokość	Nr kodu
Ø6,5	Hex	krótka	DSSIH65SS
		długa	DSIH65LS
	N-Hex	krótka	DSIN65SS
		długa	DSIN65LS

Kod(y): trzon wycisku + Pln

[Krótki – DSGP15 / Długi – DSGPS19]

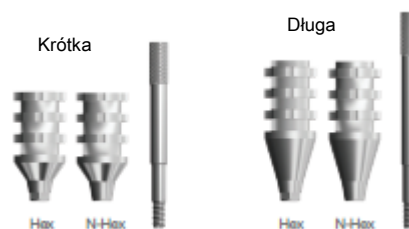

Jednotrzonowa nakładka do wycisku – standardowa / szeroka

Średnica łącznika	Wysokość	Nr kodu
Ø4,5	krótka	DSOTICS45S
	długa	DSOTICS45L

Średnica łącznika	Wysokość	Nr kodu
Ø5,5	krótka	DSOTICS55S
	długa	DSOTICS55L

Średnica łącznika	Wysokość	Nr kodu
Ø6,5	krótka	DSOTICS65S
	długa	DSOTICS65L



Nakładka do wycisku – standardowa / szeroka

Średnica łącznika	Rodzaj	Wysokość	Nr kodu
Ø4,5	Hex	krótka	DSSITH45SS
		długa	DSITH45LS
	N-Hex	krótka	DSITN45SS
		długa	DSITN45LS

Kod(y): trzon wycisku + Pln

[Krótki – DSTS / Długi – DSTL]



Średnica łącznika	Rodzaj	Wysokość	Nr kodu
Ø5,5	Hex	krótka	DSSITH55SS
		długa	DSITH55LS
	N-Hex	krótka	DSITN55SS
		długa	DSITN55LS

Kod(y): trzon wycisku + Pln

[Krótki – DSTS / Długi – DSTL]



Średnica łącznika	Rodzaj	Wysokość	Nr kodu
Ø6,5	Hex	krótka	DSSITH65SS
		długa	DSITH65LS
	N-Hex	krótka	DSITN65SS
		długa	DSITN65LS



Kod(y): trzon wycisku + Pln

[Krótki – DSTS / Długi – DSTL]

Analog implantu – wąski

Średnica łącznika	Nr kodu
Ø4,0	DSCLAS



Analog implantu – standardowy / szeroki


Średnica łącznika	Nr kodu
Ø4,5	DSCLA




Schematy protetyczne dla OneQ Sub Octa System

Wycisk na poziomie łącznika / Odbudowa z użyciem śruby

Implant wąski

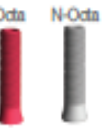
Opis	Proces	Narzędzie
Śruba		 sześciokątny wkręt 1,25
Cylinder	   cylinder złoty OCM Cylinder cylinder plastikowy	
Analog implantu		
Nakładka do wycisku	  podnoszenie Transfer	 sześciokątny wkręt 1,25
Łącznik Sub Octa		
	  śruba mocująca łącznik gojący	
Śruba OneQ	  OneQ-SL standardowa szeroka	  wkręt bez nasadki wkręt zębatkowy

Łącznik Sub Octa – standardowy / szeroki

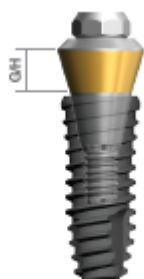


DSOA482PCT + DSSOFR4210

Średnica łącznika	G/H	Nr kodu
Ø4,8	1.0mm	DSOA480PCT
	1.5mm	DSOA481PCT
	2.5mm	DSOA482PCT
	3.5mm	DSOA483PCT
	4.5mm	DSOA484PCT
	5.5mm	DSOA485PCT

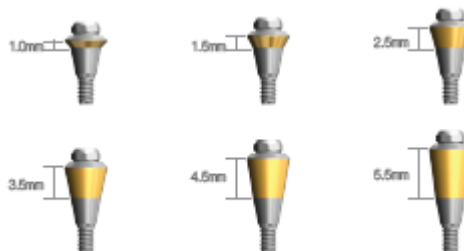

Nakładka gojąca Octa

Średnica łącznika	Nr kodu
Ø4,8	DIOHC

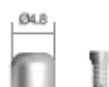

Nakładka do wycisku

Średnica łącznika	Rodzaj	Nr kodu
Ø4,8	podnoszenie	DIOIOS DIOINS
	transfer	DIOTIS

Podnoszenie



Analog implantu

Średnica łącznika	Nr kodu
Ø4,8	DIOLA



Cylinder

Średnica łącznika	Rodzaj	Kąt	Nr kodu
Ø4,8	złoty	Octa	DIOGCOS
		N-Octa	DIOGCNS
	CCM	Octa	DIOCC48OS
		N-Octa	DIOCC48NS
	plastikowy	Octa	DIOPOS
		N-Octa	DIOPNS



Kod(y): łącznik i śruba łącznika [DIOACS]

Schematy protetyczne dla MU Abutment System

Opis	Proces	Narzędzia
Śruba	 śruba utrzymująca MU	 sześciokątny wkręt 1,25
Cylinder	 cylinder złoty  cylinder CCM  cylinder plastikowy  cylinder tymczasowy	 Cap
Analoga implantu	 ochroniacz polerujący MU  analog MU	
Nakładka do wycisku	  MU Transfer	 sześciokątny wkręt 1,25
Nakładka gojąca MU		 sześciokątny wkręt 1,25
Łącznik	 lity MU  skośny MU	 wkręt łącznika MU  MU Angled Only sześciokątny wkręt 1,25
	 łącznik gojący	
Śruba OneQ	 OneQ-SL standardowa  szeroka	

Łącznik lity MU

Materiał: Ti-6Al-4V ELI /

Zalecany moment dokręcenia: 30 Ncm


1. Dostępne pojedyncze i mostki

2. Łącznik typu SCRP

Hex na zewnątrz
(wkret łącznika MU)



W powyższym przypadku może zrekompensować 40°.

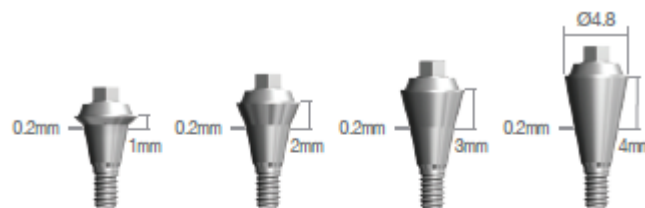


A/D	G/H	Nr kodu
Ø4.8	1mm	DSMSA4810N
	2mm	DSMSA4820N
	3mm	DSMSA4830N
	4mm	DSMSA4840N


Podwójny łącznik MU Materiał: Ti-6Al-4V ELI /

Zalecany moment dokręcenia: 30 Ncm

1. Dostępne pojedyncze i mostki

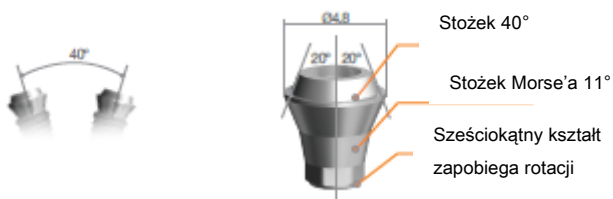

W powyższym przypadku może zrekompensować 40°.

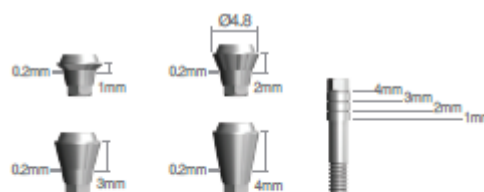

A/D	G/H	Nr kodu
Ø4.8	1mm	DSMCA4810HS
	2mm	DSMCA4820HS
	3mm	DSMCA4830HS
	4mm	DSMCA4840HS


Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSMAS]

Skośny łącznik MU Materiał: Ti-6Al-4V ELI /

Zalecany moment dokręcenia: 30 Ncm


1. Dostępne pojedyncze i mostki

Może zrekompensować 17°, 30°

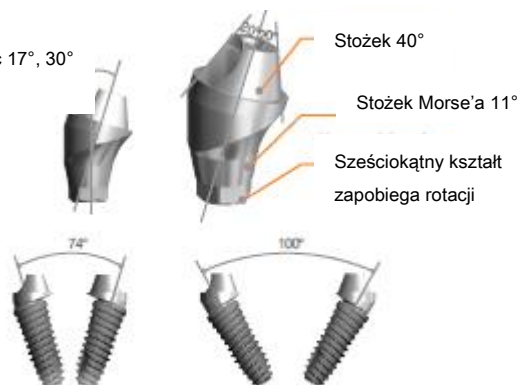

W powyższym przypadku może zrekompensować 74°.

W powyższym przypadku może zrekompensować 100°.

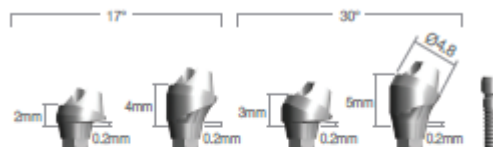


A/D	Skośny	Nr kodu
Ø4.8	17°	2mm DSMAA481720HS
		4mm DSMAA481740HS
	30°	3mm DSMAA483030HS
		5mm DSMAA483050HS

Kod(y): łącznik + śruba łącznika [DSMAS]

Schematy protetyczne dla OneQ Overdenture System

Implant wąski

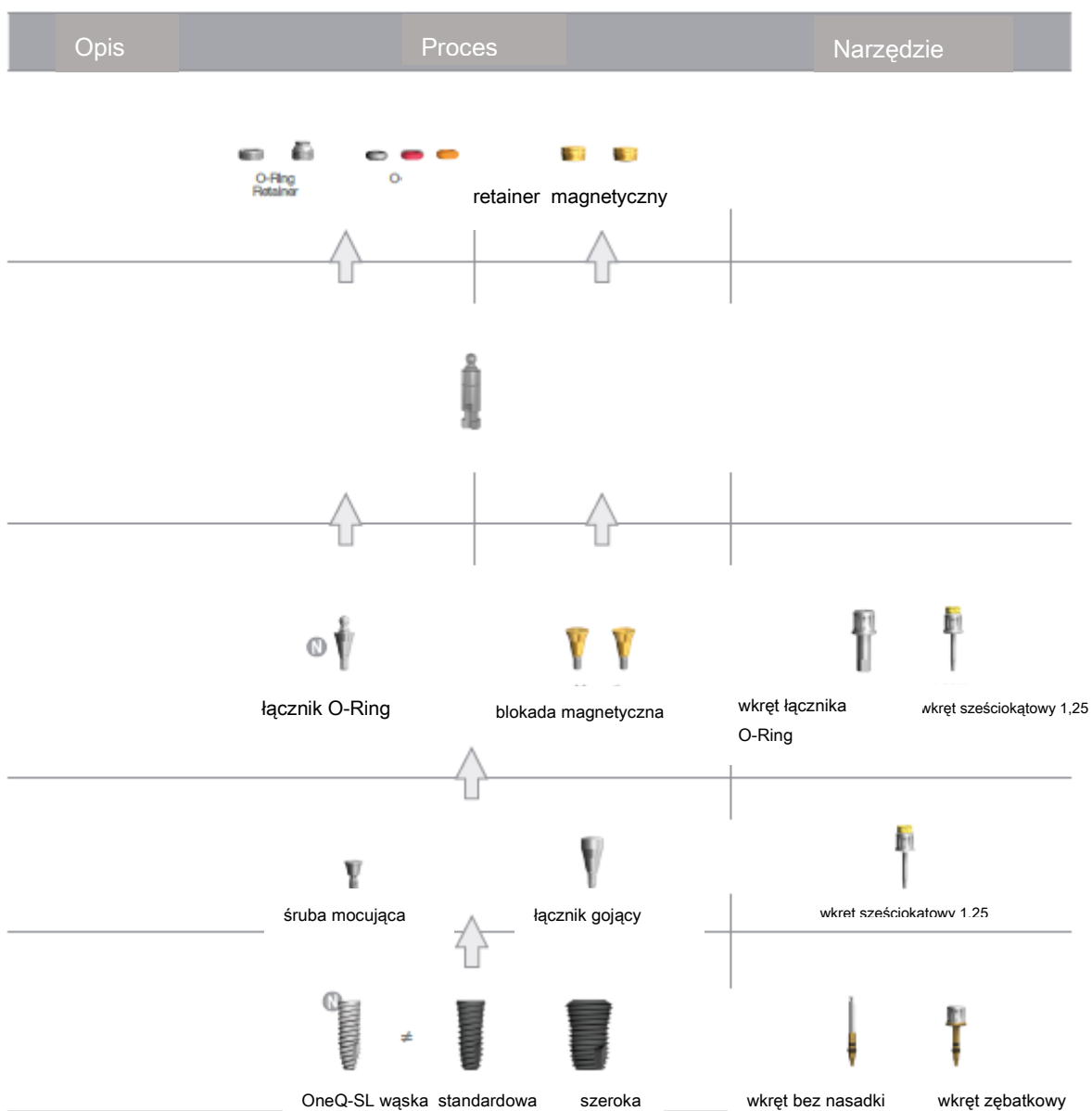


Łącznik O-Ring – wąski Zalecany moment dokręcenia: wąski – 20 Ncm, standardowy / szeroki – 30 Ncm



Średnica łącznika	G/H	Nr kodu
Ø3,5	2 mm	DSORAS20
	4 mm	DSORAS40

Łącznik O-Ring – standardowy / szeroki

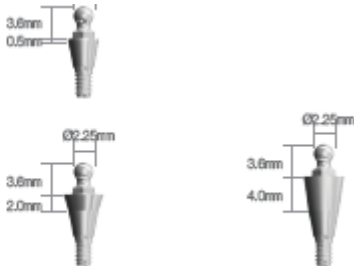

Średnica łącznika	G/H	Nr kodu
Ø3.4	0.5mm	DSORA00

Średnica łącznika	G/H	Nr kodu
Ø4.5	2mm	DSORA20
	4mm	DSORA40

Analog implantu O-Ring

Nr kodu
DOLA



Retainer O-Ring – otwarty

Nr kodu
DORS



4N

6N

Retainer O-Ring – zamknięty

Nr kodu
DORCS



4N

6N

O-Ring


Kolor łącznika	Nr kodu
CZARNY	DOAO100
CZERWONY	DOAO400
POMARAŃCZOWY	DOAO800



4N


6N

Nasadka magnetyczna OneQ

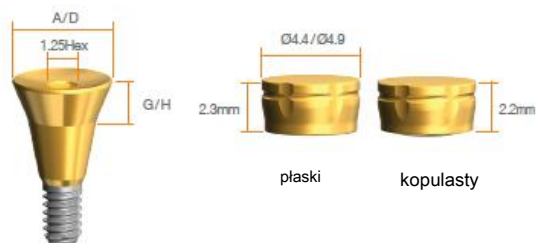

Blokada

Element mocujący

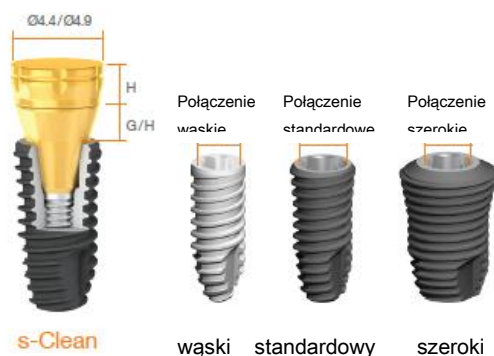

OneQ

s-Clean

wąski

standardowy

szeroki


Płaski					
Rodzaj	A/D	G/H	Kod blokady	Kod elementu mocującego	Kod zestawu
Wąski	4,4	1,0	DSNMK4410F	DMDRA4423F	DSNMK4410FS
		2,0	DSNMK4420F		DSNMK4420FS
		3,0	DSNMK4430F		DSNMK4430FS
		4,0	DSNMK4440F		DSNMK4440FS
		5,0	DSNMK4450F		DSNMK4450FS
	4,9	1,0	DSNMK4910F	DMDRA4923F	DSNMK4910FS
		2,0	DSNMK4920F		DSNMK4920FS
		3,0	DSNMK4930F		DSNMK4930FS
		4,0	DSNMK4940F		DSNMK4940FS
		5,0	DSNMK4950F		DSNMK4950FS
Standardowy / szeroki	4,4	1,0	DSRMK4410F	DMDRA4423F	DSRMK4410FS
		2,0	DSRMK4420F		DSRMK4420FS
		3,0	DSRMK4430F		DSRMK4430FS
		4,0	DSRMK4440F		DSRMK4440FS
		5,0	DSRMK4450F		DSRMK4450FS
	4,9	1,0	DSRMK4910F	DMDRA4923F	DSRMK4910FS
		2,0	DSRMK4920F		DSRMK4920FS
		3,0	DSRMK4930F		DSRMK4930FS
		4,0	DSRMK4940F		DSRMK4940FS
		5,0	DSRMK4950F		DSRMK4950FS

Kopulasty					
Rodzaj	A/D	G/H	Kod blokady	Kod elementu mocującego	Kod zestawu
Wąski	4,4	1,0	DSNMK4410D	DMDRA4422D	DSNMK4410DS
		2,0	DSNMK4420D		DSNMK4420DS
		3,0	DSNMK4430D		DSNMK4430DS
		4,0	DSNMK4440D		DSNMK4440DS
		5,0	DSNMK4450D		DSNMK4450DS
	4,9	1,0	DSNMK4910D	DSNMK4922D	DSNMK4910DS
		2,0	DSNMK4920D		DSNMK4920DS
		3,0	DSNMK4930D		DSNMK4930DS
		4,0	DSNMK4940D		DSNMK4940DS
		5,0	DSNMK4950D		DSNMK4950DS
Standardowy / szeroki	4,4	1,0	DSRMK4410D	DMDRA4422D	DSRMK4410DS
		2,0	DSRMK4420D		DSRMK4420DS
		3,0	DSRMK4430D		DSRMK4430DS
		4,0	DSRMK4440D		DSRMK4440DS
		5,0	DSRMK4450D		DSRMK4450DS
	4,9	1,0	DSRMK4910D	DMDRA4922D	DSRMK4910DS
		2,0	DSRMK4920D		DSRMK4920DS
		3,0	DSRMK4930D		DSRMK4930DS
		4,0	DSRMK4940D		DSRMK4940DS
		5,0	DSRMK4950D		DSRMK4950DS

Kod(y): blokada + element mocujący

Prosty system implantologiczny

Dentis Guide Wheel

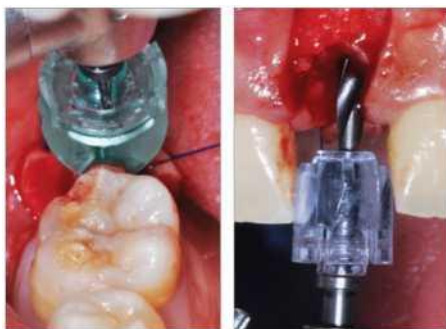

Widoczna procedura

- Dzięki przezroczystemu materiałowi miejsce zabiegu jest widoczne.

Prosta metoda

- Może być wykorzystany z każdym wiertłem początkowym.

Lepsza irygacja

- Mechanicznie ulepszony system irygacji.

Chroni przed zanieczyszczeniem krzyżowym

- Jednorazowy.

Wszechstronny

- Może być wykorzystany w wielu przypadkach.


Ekonomiczne rozwiązanie

- Pozwala uniknąć drogiego i skomplikowanego systemu wspomagania zabiegów chirurgicznych.

Skrócony czas zabiegu

- Pozwala łatwo określić miejsce osteotomii, dzięki prostemu porównaniu Guide Wheel z sąsiednim zębem.

Wiertło początkowe Guide Wheel

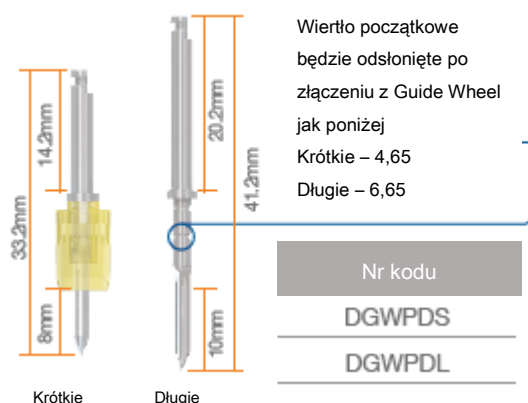


Guide Wheel



Używaj Guide Wheel w połączeniu z wiertłem wstępnym do wstępnej osteotomii i podczas pomiaru protezy.

Kod	DGW6	DGW7	DGW8	DGW9	DGW10	DGW12
Kolor	żółty	różowy	niebieski	zielony	czarny	przezroczysty
Rozmiar	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø12

Słupek prowadzący

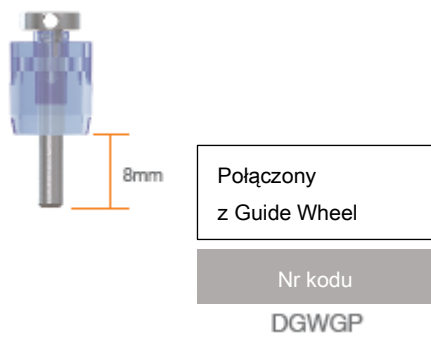

Igła prowadząca




- Używaj GuidePin (igły prowadzącej) do osteotomii w celu wizualizacji protezy
- Używaj GuidePin (igły prowadzącej) w wielu przypadkach

Nr kodu	DGWP6	DGWP7	DGWP8	DGWP9	DGWP10	DGWP12
Rozmiar	Ø6	Ø7	Ø8	Ø9	Ø10	Ø12


- Używaj G

- Używaj G

Prosta instrukcja

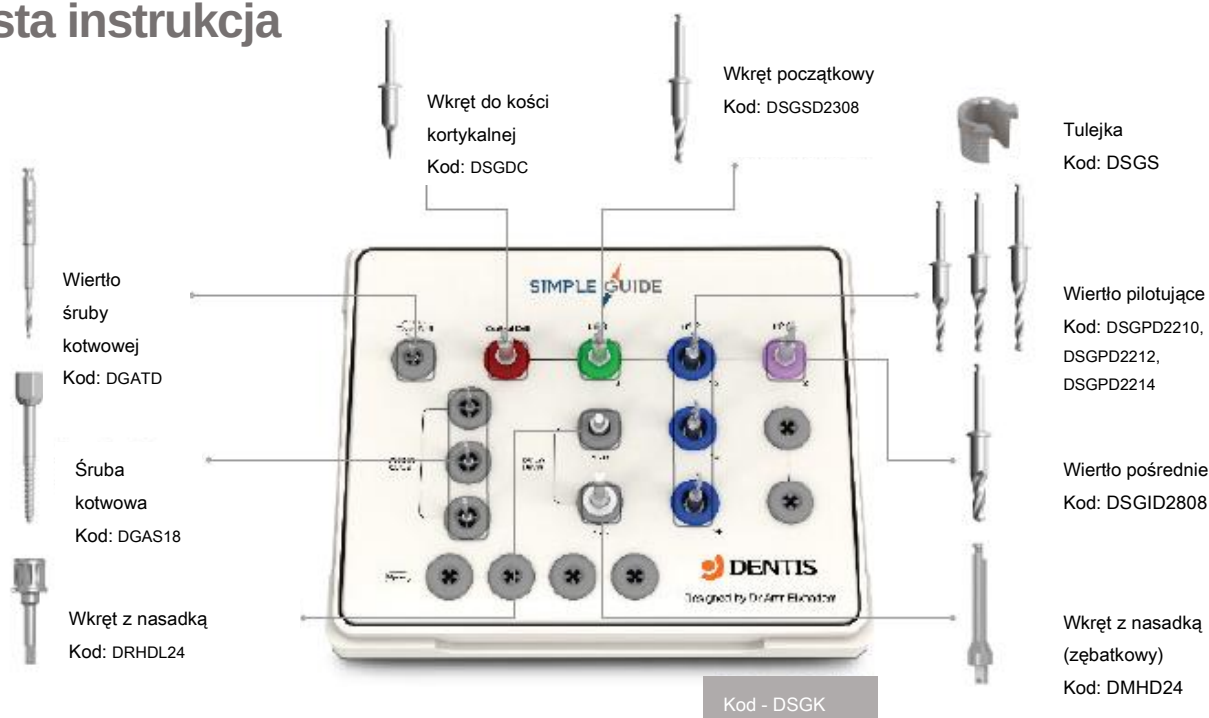

Przebieg zabiegu chirurgicznego wspomaganego

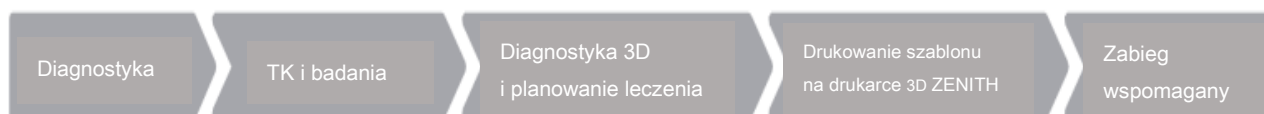

Dzięki systemowi drukowania 3D Zenith uda Ci się skończyć wszystko w zaledwie jeden dzień.

System drukowania 3D ZENITH

Drukarka SLA 3D w stomatologii cyfrowej.

Największa dokładność i najwyższa jakość.

Doskonała okazja, by wejść do świata stomatologii cyfrowej!

Drukarka 3D ZENITH® zapewnia największą dokładność i niezwykłą szybkość.

Drukarka 3D ZENITH® to doskonałe narzędzie w Twoim gabinecie i laboratorium, cechujące się wysoką precyzją.



Instrukcja wiercenia OneQ



1. Nacięcie

- Wykonaj nacięcie w miejscu wstawienia implantu.



2. Wiertło Lindemann

- Wywierć otwór prowadzący dla wstępnego wiercenia, używając wiertła Lindemann.
- Zalecamy ustawienie 1 000 obr./min podczas wiercenia i kontynuowanie wiercenia do dna linii oznaczonej laserem.



3. Wiertło proste

- Zalecamy ustawienie obrotów na 800-1000 obr./min podczas wiercenia i kontynuowanie wiercenia do linii oznaczonej laserem na dnie.
*Obroty można dostosować do gęstości kości.
- Wybierz odpowiednie wiertło, które jest równe długości montowanej śruby, i kontynuuj wiercenie z własnym ograniczeniem.

4. Nawiercanie

- Zalecana liczba obr./min podczas wiercenia – 800-1000.
*Obroty można dostosować do gęstości kości.
- W przypadku kości D1-D2 należy wiercić aż do górnej linii lasera, w przypadku kości D3-D4 należy wiercić aż do dolnej linii lasera.



5. Wstawienie implantu [1]

- Wstaw implant, używając wkrętu bez nasadki s-Clean, który jest w zestawie chirurgicznym.
- Zalecamy moment dokręcenia 30 Ncm i 20 obr./min podczas wstawiania implantu.
*Ustaw maksymalny moment dokręcenia na 40 Ncm.

6. Wstawienie implantu [2]

- Korzystając z wkrętu zębatkowego, który jest w zestawie chirurgicznym, połącz wkręt zębatkowy s-Clean i wstaw implant.
- Wstawianie należy kontynuować do linii lasera na wkręcie.
- Powinno to być ostrzeżenie przed zbyt wysokim momentem dokręcenia.



7. Połączenie ze śrubą mocującą

- Wyjmij śrubę mocującą z saszetki na ampulki, używając ręcznego wkrętu sześciokątnego 1,25 i połącz śrubę mocującą z implantem.
- Podczas łączenia śruby mocującej z implantem ustaw moment dokręcenia na 5-8 Ncm.




8. Szew

- Po połączeniu śruby mocującej z implantem należy zszyć rozcięte dziąsło.
- Należy upewnić się, że przyszyto wystarczająco dużą część dziąsła, aby zapewnić stabilność.


Koncepcja wiercenia i wstawiania implantów

Podczas wstawiania implantu wiercenie musi odbywać się 0,5 mm głębiej, niż sięga długość implantu, a implant musi być umieszczony 0,5 mm pod poziomem kości.


Ø3.0 x 10mm

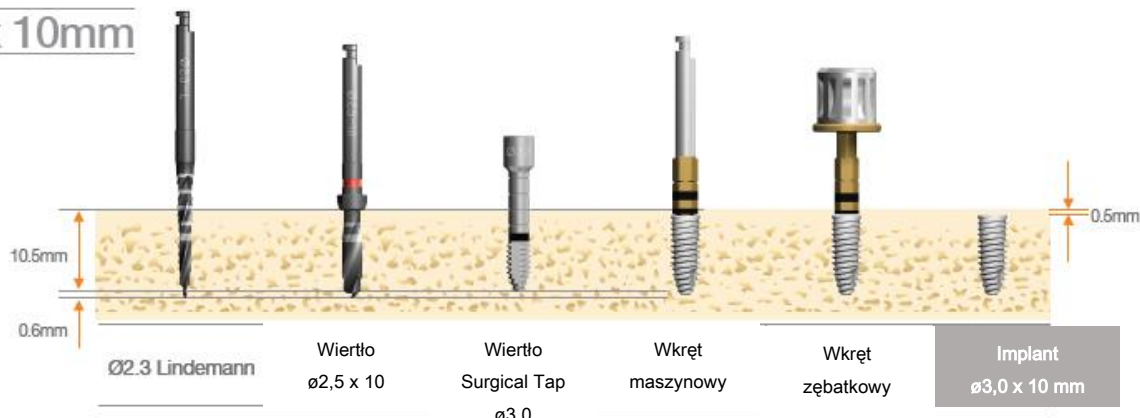

Ø3.3 x 10mm

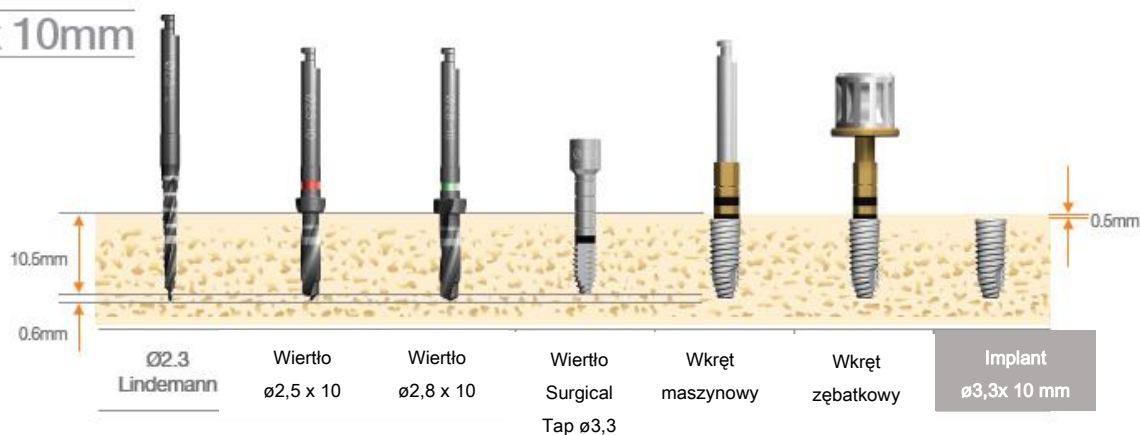


Ø3.7 x 10mm

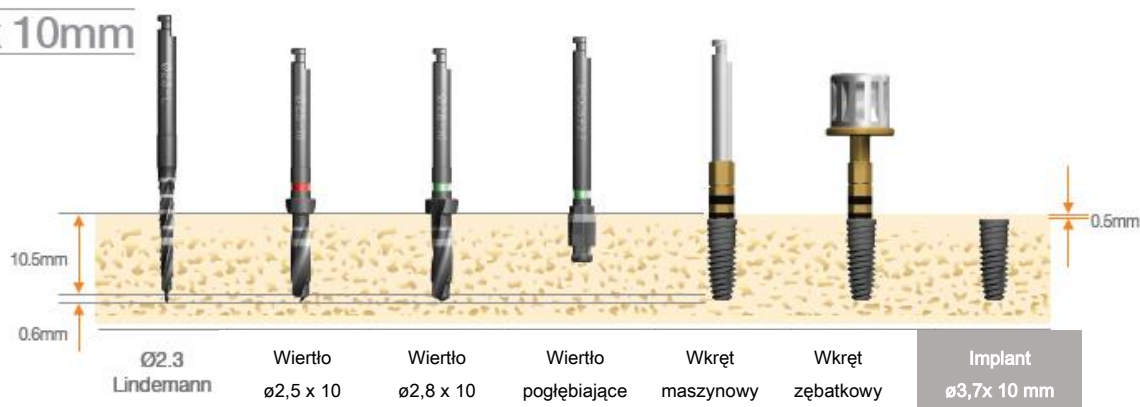





Ø4.2 x 10mm



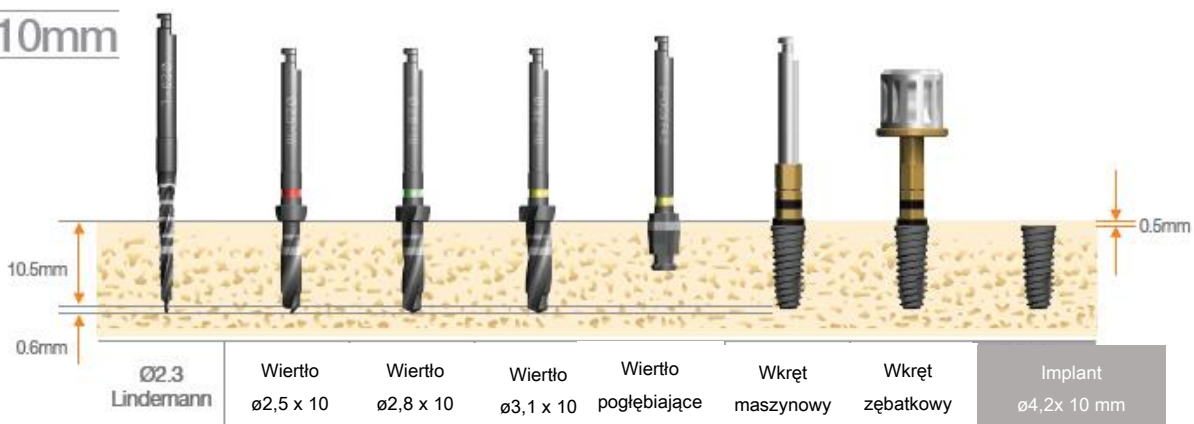


Ø4.7 x 10mm

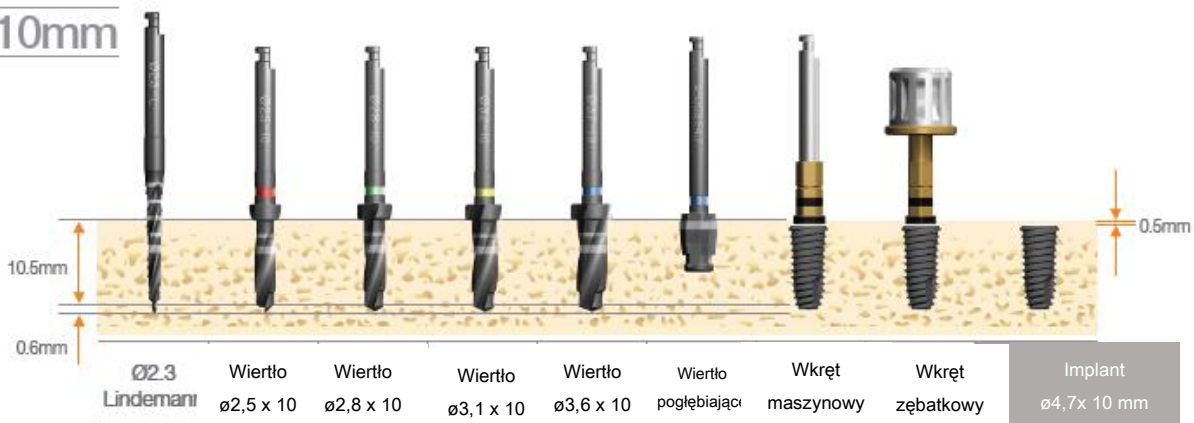


Ø5.2 x 10mm

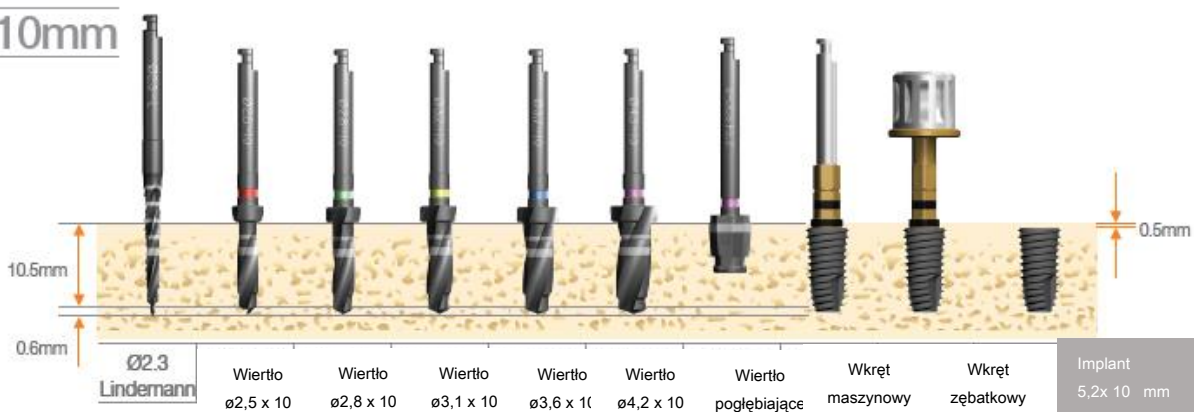

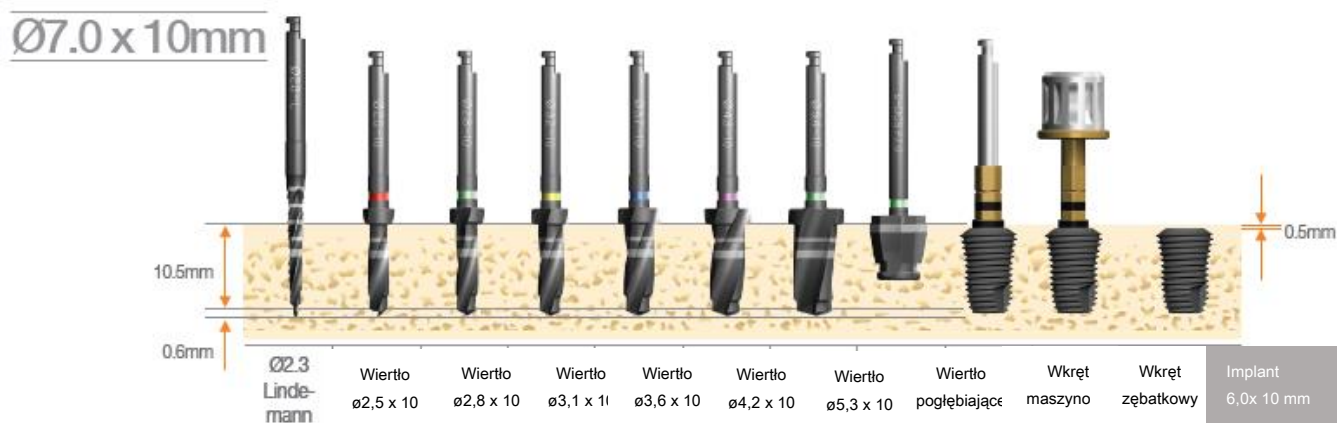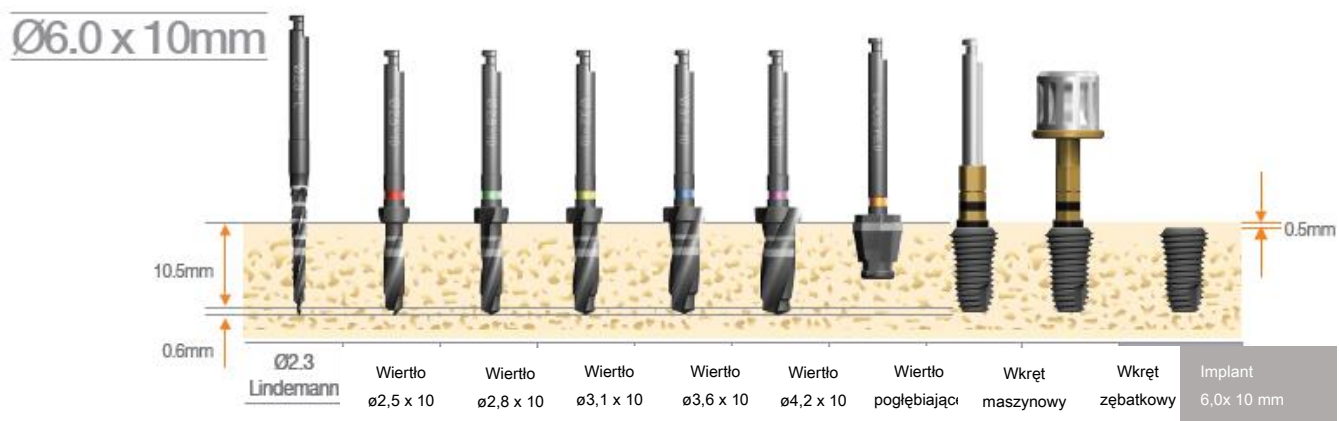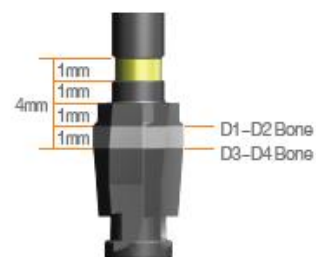


Instrukcja obsługi zestawu chirurgicznego


Pokrywa

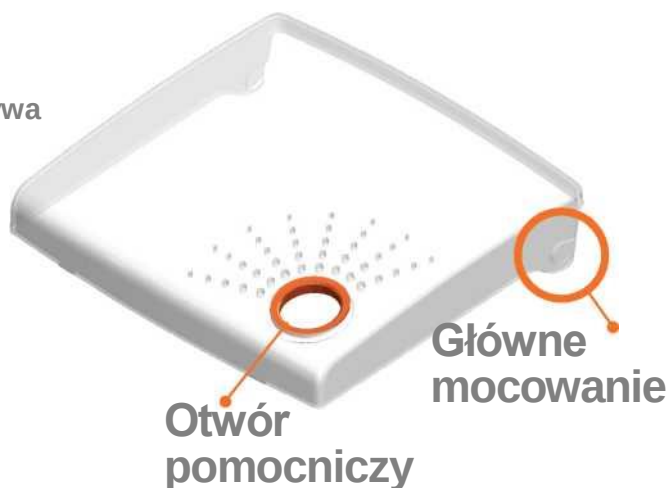

Taca środkowa

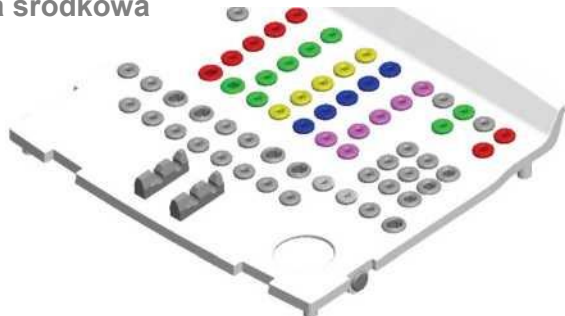

Podstawa

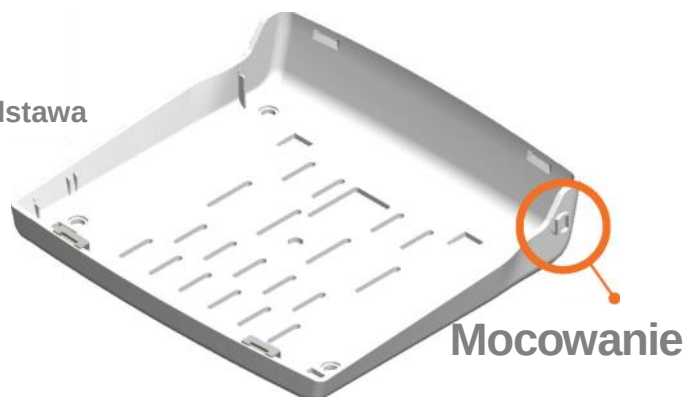

ROZDZIELENIE



Podnieś pokrywę palcem, używając otworu pomocniczego.



Po podniesieniu pokrywy pod odpowiednim kątem, usuń ją.

MONTAŻ



Po podniesieniu pokrywy pod odpowiednim kątem, zamontuj ją, korzystając z mocowań.

DEMONTAŻ




Podnieś środkową tacę, umieszczając palec w otworze pomocniczym w kierunku zaznaczonym strzałką.

MONTAŻ




Najpierw zamontuj dolną część środkowej tacy, a następnie górną.

Zestaw chirurgiczny OneQ-SL Premium

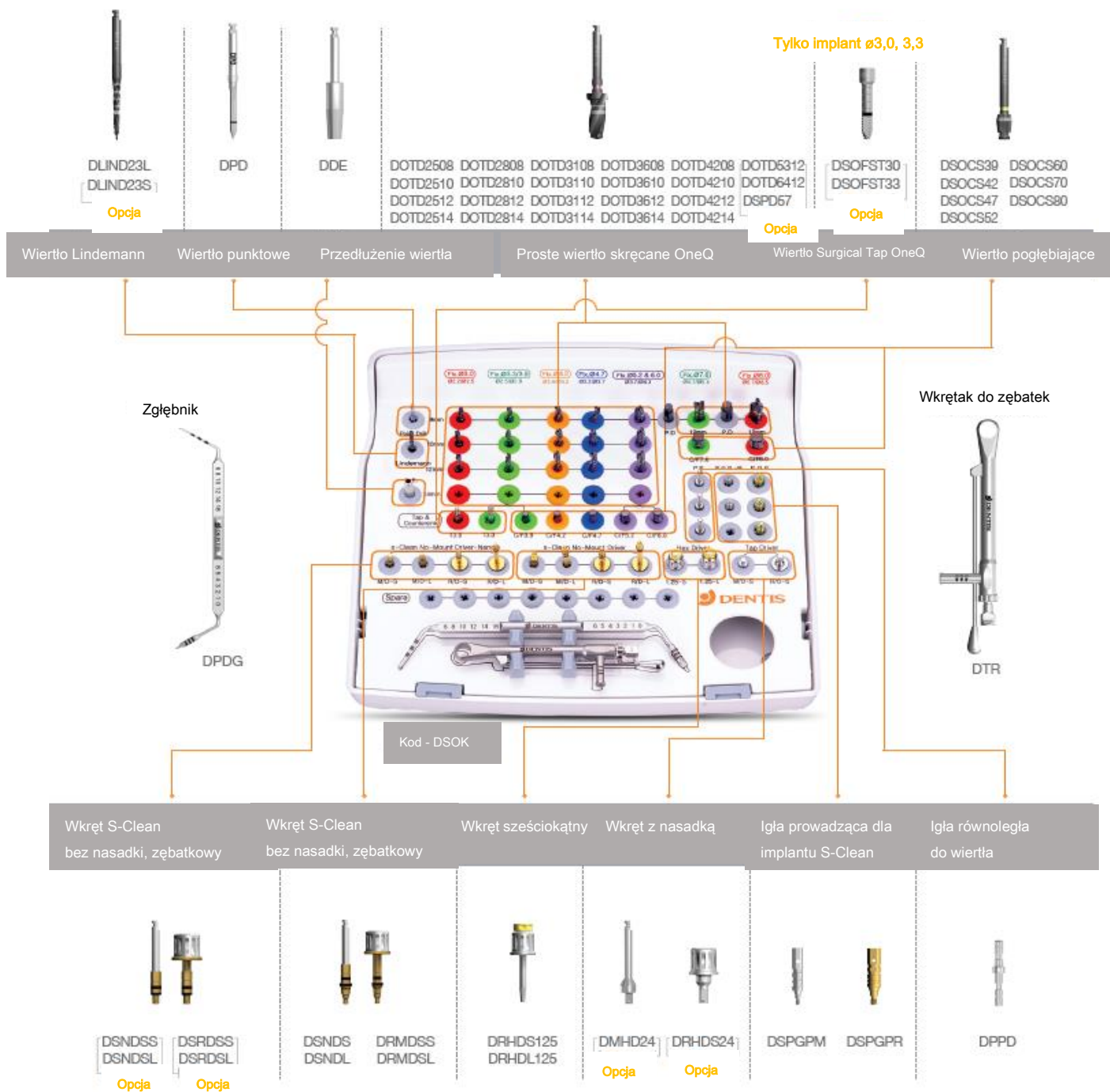

Zaawansowany zestaw chirurgiczny OneQ-SL

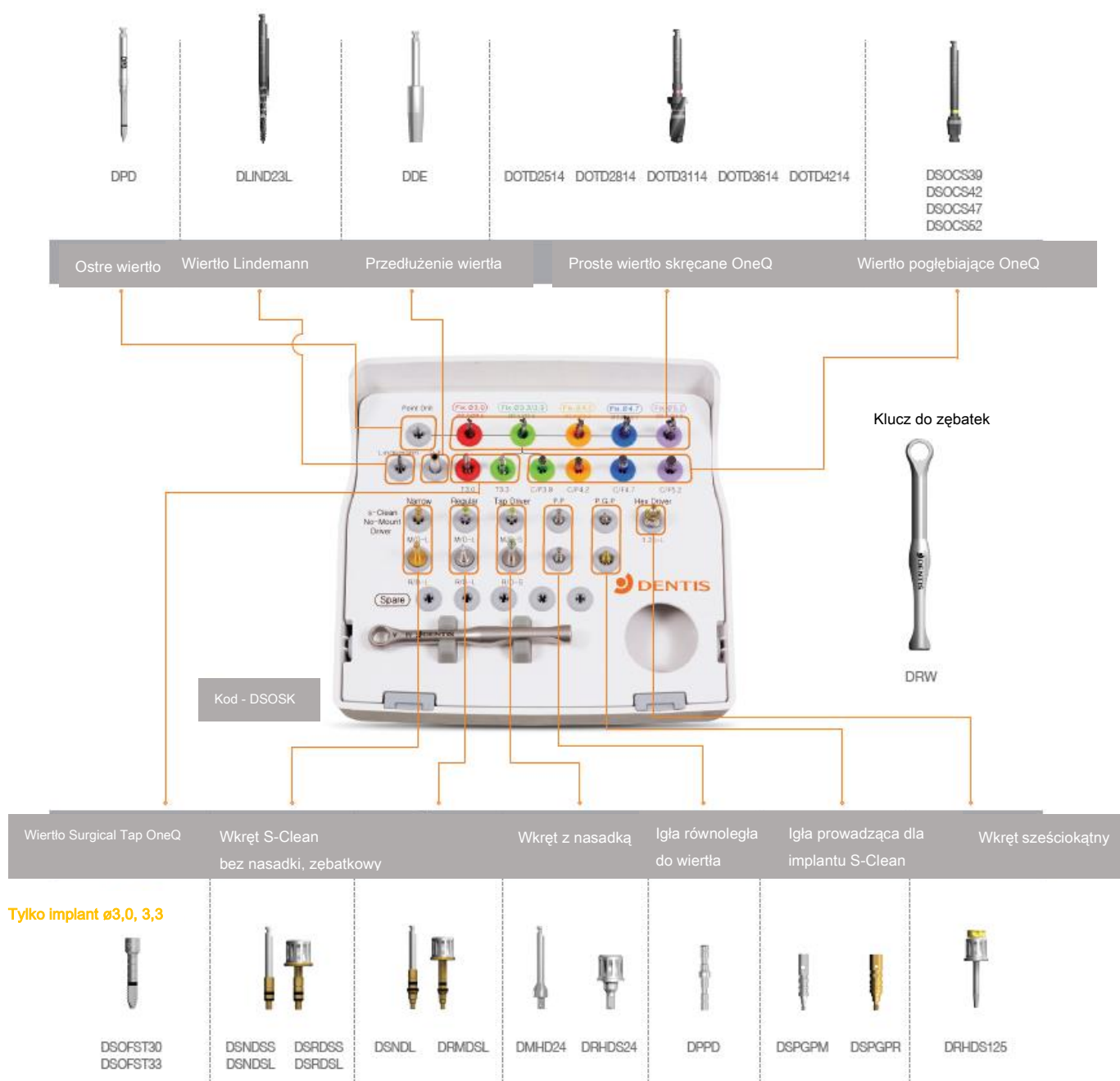

Jeden system dla
wszystkich wskazań

OneQ-SL



www.dentisimplant.co.kr/eng/



Tel. +82-1899-2804 | Fax. +82-53-583-2806
99, Seongseoseo-Ro, Dalseo-Gu, Daegu, Korea



Tel. +1-323-677-4363~5 | Fax. +1-323-677-4366
6 Centerpointe Drive, Suite 600 La Palma CA 90623



Tel. +886-2-2808-5933 | Fax. +886-2-2624-2309
2F.,No.48,31,Minzu Rd., Tamsui Dist, New Taipei City 251,Taiwan(R.O.C.)



Tel. +021-5111-3828 | Fax. +021-5111-3828
上海市长宁区中山西路933号2205室

D-C-00SL-S-V3-201703-ENG

©2017 DENTIS CO.,LTD.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Specyfikacje mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Znaki towarowe są własnością spółki DENTIS CO., LTD lub jej poszczególnych właścicieli.

